


1

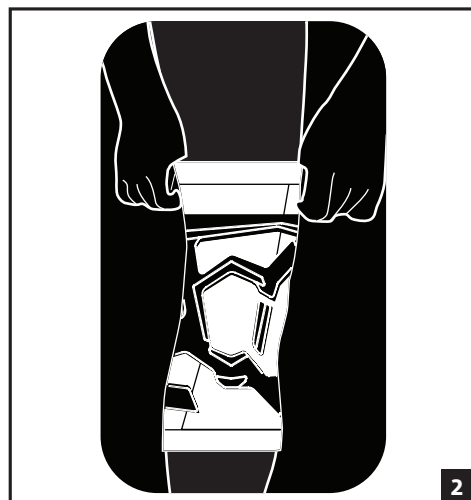

2

## ENGLISH

**BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.**

### INTENDED USER PROFILE:

The intended user should be a licensed medical professional, the patient, the patient's caretaker, or a family member providing assistance. The user should be able to read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

**RECOMMENDED FOR:** Strains, Soreness, Repetitive Motion Injuries, Proprioception, Inflammation/Swelling, Degenerative Meniscus, Tendonitis, Mild Joint Instability, Compression.

**CONTRAINDICATIONS:** Do not use if you are allergic to any of the materials contained in this product.

**INTENDED USE/INDICATIONS:** The DonJoy 2MM Knee Sleeve is designed to support the knee. It may be suitable for use following strains, sprains and soft tissue injuries and, may help to enhance patella stability. Soft-good/semi-rigid designed to restrict motion through elastic or semi rigid construction.

### WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- The support should be snug but not impair circulation.
- Do not use over open wounds.
- If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, you should contact your doctor immediately.
- Do not use this device if it was damaged and/or package has been opened.

**NOTE:** Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

### APPLICATION INFORMATION:

1. Pull sleeve on until the patella is in the center of the silicone opening. (Island silicone piece always sits on the medial side of the patella). (Figure 2)

### CLEANING INSTRUCTIONS:

 Hand wash in water (86°F/30°C) using soap. Air dry.

**Note:** If not rinsed thoroughly, residual soap may cause irritation and deteriorate material.

### MATERIAL CONTENTS:

**Main Body:** Polyester, Carbonized Bamboo;

**Banding:** Silicone

**WARRANTY:** DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale. To the extent the terms of this warranty are inconsistent with local regulations, the provisions of such local regulations will apply.

### FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.

 **NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.**

### LEVEL OF SUPPORT:



NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

## ESPAÑOL

**ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.**

### PERFIL DEL USUARIO PREVISTO:

El usuario previsto debe ser un profesional médico autorizado, el paciente, el cuidador del paciente o un familiar que proporcione asistencia. El usuario debe poder leer, comprender y ser físicamente capaz de seguir todas las instrucciones, advertencias y precauciones proporcionadas en la información de uso.

**RECOMENDADO PARA:** Esguinces, sensibilidad, lesiones por movimientos repetitivos, propiocepción, inflamación/hinchazón, lesiones degenerativas de meniscos, tendinitis, inestabilidad articular leve, compresión.

**CONTRAINDICACIONES:** No usar si es alérgico a alguno de los materiales que contiene este producto.

**USO PREVISTO/INDICACIONES:** La rodillera DonJoy 2MM está diseñada para ofrecer soporte para la rodilla. Puede ser adecuada para usar después de esguinces, distensiones y lesiones en los tejidos blandos, y puede ayudar a mejorar la estabilidad de la rótula. Producto blando/semirrígido diseñado para restringir el movimiento a través de una estructura elástica o semirrígida.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:


- El soporte debe quedar bien ajustado, pero sin impedir la circulación.
- No debe aplicarse sobre heridas abiertas.
- Si sufre algún dolor, inflamación, cambios de sensibilidad o cualquier otra reacción poco frecuente al utilizar este producto, póngase en contacto con su médico inmediatamente.
- No utilice este dispositivo si está dañado o si el envase está abierto.

**NOTA:** Comuníquese con el fabricante y la autoridad competente en caso de un incidente grave que surja debido al uso de este dispositivo.

### INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:

1. Tire del forro hasta que la rótula quede centrada en la abertura de silicona. (La parte de silicona queda siempre en el medio de la rótula). (Figura 2)

### INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

 Lávela a mano con agua (30 °C) y jabón. Deje secar al aire.

**Nota:** Si no se enjuaga correctamente, los restos de jabón pueden ocasionar irritación y deteriorar el material.

### COMPOSICIÓN DE LOS MATERIALES:

**Área principal:** poliéster, bambú carbonizado

**Bandas:** silicona

**GARANTÍA:** DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de mano de obra, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta. Si los términos de esta garantía son incompatibles con la normativa local, se aplicarán las disposiciones de la normativa local.

### PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.

 **NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

### NIVEL DE SOPORTE:



AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.



## TRIZONE KNEE

Rodillera para triple zona

Joelheira Trizone

Orthèse de genou trizone

Наколенник trizone

Trizone 护膝



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany

©2020 DJO, LLC



DJO, LLC  
1430 Decision Street  
Vista, CA 92081-8553 • USA

DP1511F11 REV B - 2020-12-15

