



INSTRUCTIONS FOR USE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

JOBST® Bella™ Lite & Strong

- | | | |
|--|--|--|
| (EN) Medical compression garment | (NO) Medisinsk kompresjonsplagg | (HU) Gyógyászati kompressziós ruhadarab |
| (DE) Medizinische Kompressionsversorgung | (DA) Medicinsk kompressionsprodukt | (RO) Articole de îmbrăcămințe compresivă medicinală |
| (FR) Vêtement de compression médicale | (FI) Lääkinnällinen kompressiovaate | (CS) Zdravotní kompresní výrobky |
| (ES) Prenda de compresión médica | (IS) Þrýstifatnaður í lækningaskyni | (SL) Medicinsko kompresijsko oblacilo |
| (PT) Peça de vestuário de compressão médica | (ET) Meditsiinilised kompressioonrõivad | (SK) Lekárske kompresné odevy |
| (IT) Indumenti compressivi medicali | (LT) Medicininė kompresinė apranga | (RU) Медицинская компрессионная одежда |
| (NL) Medische compressiekleding | (LV) Medicīniskais kompresijas apģērbs | (TR) Tibbi kompresyon giysisi |
| (SV) Medicinskt kompressionsplagg | (PL) Medyczna odzież uciskowa | (AR) رداء ضاغط طبي |
| | | (HE) כפפות ושרוול ל לחץ רפואיים |

FIBER CONTENT

- EN

FIBER CONTENT
- DE

MATERIALZUSAMMEN-
SETZUNG
- FR

COMPOSITION
- ES

CONTENIDO DE FIBRA
- PT

TEOR DE FIBRA
- IT

COMPOSIZIONE DEL
MATERIALE
- NL

VEZELGEHALTE
- SV

FIBERINNEHÅLL

NO

FIBERINNHOLD

DA

FIBERINDHOLD

FI

KUITUSISÄLTÖ

IS

TREFAJAINNIHALD

ET

KIULINE KOOSTIS

LT

PLUOŠTO SUDĖTIS

LV

AUDUMA SASTĀVS

PL

ZAWARTOŚĆ WŁÓKIEN

HU

SZÁLÖSSZETÉTEL

RO

CONȚIN FIBRE

CS

SLOŽENÍ MATERIÁLU

SL

VSEBNOST VLAKEN

SK

OBSAH VLÁKIEŇ

RU

СОСТАВ ВОЛОКОН

TR

FİBER İÇERİK

AR

محتوى النسيج

HE

תכולת הסיבים

Brand ¹ /CCL Marque/CCL	Elastane (Spandex) ² Élasthanne (Spandex)	Polyamide (Nylon) ³ Polyamide (Nylon)	Silicone ⁴ Silicone
JOBST® Bella Strong Ready-to-Wear Armsleeve with Silicone Band, 15-20 mmHg	18 %	74 %	8 %
JOBST® Bella Strong Ready-to-Wear Armsleeve with Silicone Band, 20-30 mmHg	20 %	72 %	8 %
JOBST® Bella Strong Ready-to-Wear Armsleeve with Silicone Band, 30-40 mmHg	23 %	69 %	8 %
JOBST® Bella Strong Ready-to-Wear Armsleeve, 15-20 mmHg	20 %	80 %	–
JOBST® Bella Strong Ready-to-Wear Armsleeve, 20-30 mmHg	24 %	76 %	–
JOBST® Bella Strong Ready-to-Wear Armsleeve, 30-40 mmHg	26 %	74 %	–
JOBST® Bella Strong Ready-to-Wear Gauntlet, 15-20 mmHg	9 %	91 %	–
JOBST® Bella Strong Ready-to-Wear Gauntlet, 20-30 mmHg	9 %	91 %	–
JOBST® Bella Strong Ready-to-Wear Glove, 15-20 mmHg	30 %	70 %	–

COMPOSITION

Brand ¹ /CCL Marque/CCL	Elastane (Spandex) ² Élasthanne (Spandex)	Polyamide (Nylon) ³ Polyamide (Nylon)	Silicone ⁴ Silicone
JOBST® Bella Strong Ready-to-Wear Glove, 20-30 mmHg	35 %	65 %	–
JOBST® Bella Lite Ready-to-Wear Armsleeve, 15-20 mmHg	16 %	84 %	–
JOBST® Bella Lite Ready-to-Wear Armsleeve with Silicone Band, 15-20 mmHg	17 %	80 %	3 %
JOBST® Bella Lite Ready-to-Wear Armsleeve, 20-30 mmHg	20 %	80 %	–
JOBST® Bella Lite Ready-to-Wear Armsleeve with Silicone Band, 20-30 mmHg	22 %	75 %	3 %
JOBST® Bella Lite Ready-to-Wear Gauntlet, 15-20 mmHg	16 %	84 %	–
JOBST® Bella Lite Glove, 15-20 mmHg	41 %	59 %	–
JOBST® Bella Lite Ready-to-Wear Gauntlet, 20-30 mmHg	14 %	86 %	–
JOBST® Bella Lite Ready-to-Wear Combined Armsleeve, 15-20 mmHg	19 %	81 %	–
JOBST® Bella Lite Ready-to-Wear Combined Armsleeve with Silicone Band, 15-20 mmHg	15 %	77 %	8 %
JOBST® Bella Lite Ready-to-Wear Combined Armsleeve, 20-30 mmHg	21 %	79 %	–
JOBST® Bella Lite Ready-to-Wear Combined Armsleeve with Silicone Band, 20-30 mmHg	17 %	75 %	8 %
JOBST® Bella Lite Glove, 20-30 mmHg	41 %	59 %	–

FIBER CONTENT / COMPOSITION

EN 1 Brand 2 Elastane (Spandex) 3 Polyamide (Nylon) 4 Silicone	NO 1 Varemerke 2 Elastan (Spandex) 3 Polyamidnylon 4 Silikon	HU 1 Márka 2 Elastán (Spandex) 3 Poliamid nejlon 4 Szilikon
DE 1 Marke 2 Elastan 3 Polyamide (Nylon) 4 Silikon	DA 1 Varemærke 2 Elastan (Spandex) 3 Polyamidnylon 4 Silikone	RO 1 Marcă 2 Elastan (Spandex) 3 Nailon de poliamidă 4 Silicon
FR 1 Marque 2 Élasthanne (Spandex) 3 Polyamide (Nylon) 4 Silicône	FI 1 Tuotemerkki 2 Elastania (Spandex) 3 Polyamidia (Nailonia) 4 Silikonia	CS 1 Značka 2 Elastan (Spandex) 3 Polyamid (Nylon) 4 Silikon
ES 1 Marca 2 Elastano (Spandex) 3 Poliamida nailon 4 Silicona	IS 1 Vörumerki 2 Elastan (Spandex) 3 Pólíamíðnælon 4 Silíkon	SL 1 Znamka 2 Elastan (Spandeks) 3 Poliamid - najlon 4 Silikon
PT 1 Marca 2 Elastano (Spandex) 3 Poliamida (Nylon) 4 Silicône	ET 1 Tootemark 2 Elastaan (Spandeks) 3 Põlamiidnailon 4 Silikoon	SK 1 Značka 2 Elastan (Spandex) 3 Polyamidový (Nylon) 4 Silikón
IT 1 Marchio 2 Elastan (Spandex) 3 Poliammide (Nylon) 4 Silicône	LT 1 Prekės ženklas 2 Elastanas (Spandeksas) 3 Poliamidas (Nailonas) 4 Silikonas	RU 1 Марка 2 Эластан (спандекс) 3 Полиамид, нейлон 4 Силикон
NL 1 Merk 2 Elastaan (Spandex) 3 Polyamide - nylon 4 Siliconen	LV 1 Zīmols 2 Elastāns (Spandekss) 3 Poliamīds (Neilons) 4 Silikons	TR 1 Marka 2 Elastan (Spandeks) 3 Poliamid (Naylon) 4 Silikon
SV 1 Varumärke 2 Elastan (Spandex) 3 Polyamid (Nylon) 4 Silikon	PL 1 Marka 2 Elastan (Spandeks) 3 Poliamid (Nylon) 4 Silikon	AR 1 العلامة التجارية 2 إيلاستان (إسبانديكس) 3 نايلون متعدد الاميد 4 سيليكون 1 מותג 2 אלסטן (ספנדקס) 3 נילון פוליאמיד 4 סיליקון

EN Topbands contain silicone. Caution: Products labelled on the packaging with ☹️ contain natural rubber (latex) which may cause allergic reactions.	IT Le fascie superiori contengono silicone. Avvertenza: i prodotti che riportano l'etichetta ☹️ sulla confezione contengono gomma naturale (lattice), che può causare reazioni allergiche.
DE Haftbänder enthalten Silikon. Achtung: Latexhaltige Produkte sind mit dem Symbol ☹️ gekennzeichnet. Latex kann allergische Reaktionen hervorrufen.	NL De anti-slip boorden bevatten siliconen. Let op: producten die op de verpakking zijn gelabeld met ☹️ bevatten natuurlijk rubber (latex) dat allergische reacties kan veroorzaken.
FR Les bandes de maintien contiennent du silicone. Mise en garde : les produits étiquetés dont l'emballage ☹️ contiennent du caoutchouc naturel (latex) susceptible de provoquer des réactions allergiques.	SV Övre band innehåller silikon. Obs: Produkter märkta med ☹️ på förpackningen innehåller naturgummi (latex) som kan orsaka allergiska reaktioner.
ES Las bandas superiores contienen silicona. Precaución: los productos etiquetados en el paquete con ☹️ contienen caucho natural (látex), que puede causar reacciones alérgicas.	NO Toppbåndet inneholder silikon. Advarsel: Produkter som er merket på pakken med ☹️ inneholder naturlig gummi (lateks) som kan føre til allergiske reaksjoner.
PT As faixas superiores contêm silicone. Cuidado: os produtos etiquetados na embalagem com ☹️ contêm borracha natural (látex), que pode provocar reacções alérgicas.	DA Kantbåndene indeholder silikone. Forsigtig: Produkter, som på emballagen er mærket med ☹️, indeholder naturgummi (latex), som kan forårsage allergiske reaktioner.

FIBER CONTENT / COMPOSITION

FI Yläosan nauhat sisältävät silikonia. Huomio: Tuotteet, joiden pakkauksessa on seuraava merkintä ☹️, sisältävät luonnonkumia.	CS Horní lemy obsahují silikon. Upozornění: Výrobky, které jsou na balení označeny ☹️, obsahují přírodní kaučuk (latex), který může způsobovat alergické reakce.
IS Stroffbönd innihalda sílikón. Varð: Vörur merktar á umbúðunum með ☹️ innihalda náttúrulegt gúmmí (latex symbo) sem getur valdið öfnæmisviðbrögðum.	SL Zgornji trakovi vsebujejo silikon. Pozor: Izdelki, ki imajo na embalaži oznako ☹️, vsebujejo naravno gumo (lateks), ki lahko povzroči alergijske reakcije.
ET Viršutiini juustj südetütye yra silikono. Dėmesio: Ant pakuotės pažymėtame gaminiuose ☹️ yra natūralaus kaučiuko (lateks), kuris gali sukelti alergines reakcijas.	SK Vrchné pásky obsahujú silikón. Upozornenie: Výrobky označené na obale symbolom ☹️ obsahujú prírodný kaučuk (latex), ktorý môže spôsobiť alergické reakcie.
LT Viršutinių juostų sudėtyje yra silikono. Dėmesio! Gaminiuose, pažymėtuose ant pakuotės ☹️ ženklų, yra natūraliojo kaučiuko (lateks), kuris gali sukelti alergines reakcijas.	RU Полосы на верхнем креплении (резинке) содержат силикон. Внимание: продукты, на упаковке которых нанесен символ ☹️, содержат натуральный каучук (латекс), который может стать причиной аллергических реакций.
LV Augšmalās satur silikonu. Uzmanību: Produkti, kas uz iepakojuma marķēti ar ☹️, satur dabisko kaučuku (lateksu), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.	TR Üst bantlar silikon içerir. Dikkat: Ambalaj etiketinde ☹️ sembolü bulunan ürünler alerjik reaksiyonlara yol açabilecek doğal kauçuk (lateks) içerir.
PL Paski elastyczne w górnej części zawierają silikon. UWAGA: Wyroby, na których etykięcie na opakowaniu widnieje symbol ☹️, zawierają naturalny kauczuk (lateks), który może powodować reakcje alergiczne.	AR تحتوي الأشرطة العليا على السيليكون. تحذير: تحتوي المنتجات الموصوفة على العبوة ☹️ على مطاط طبيعي (اللاتكس) مما قد يسبب حساسية.
HU A felső szalagok szilikon tartalmazznak. Figyelemztetés: Azok a termékek, amelyek csomagolásán ☹️ található, természetes gumit (latexet) tartalmazznak, ami allergiás bőrréakciót válthat ki.	HE הרצועות העליונות מכילות סיליקון. תחזיר: מוצרים שעל אריהם מופיע ☹️ מכילים גומי טבעי (לטיקס) העלול לגרום לתגובות אלרגיות.
RO Benzile superioare conțin silicon. Atenție: Benzile superioare conțin silicon. Produsele etichetate pe ambalaj cu ☹️ conțin cauciuc natural (latex) care poate provoca reacții alergice.	

CLEANSING AND CARE / NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Mild washing process, max. 40°C (105°F)
Processus de lavage délicat / doux, max. 40°C (105°F)



Do not bleach
Ne pas blanchir



Tumble drying possible at low heat, max. 60°C (140°F)
Sèche-linge à basse température, max. 60°C (140°F)



Dry flat (Lay out horizontally for drying)
Séchage à plat



Do not iron
Ne pas repasser



Do not dry-clean
Ne pas nettoyer à sec



Drip line drying in the shade
Séchage par égouttage sur une corde et à l'ombre

JOBST® PRODUCT FEATURES

EN JOBST® PRODUCT FEATURES

DE JOBST® PRODUKTEIGENSCHAFTEN

FR CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS JOBST®

ES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO JOBST®

PT CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO JOBST®

IT CARATTERISTICHE PRODOTTO JOBST®

NL JOBST® PRODUCTKENMERKEN

SV JOBST® PRODUKTEGENSKAPER

NO JOBST® PRODUKTFUNKSJONER

DA JOBST® PRODUKTFUNKTIONER

FI JOBST® TUOTEOMINAISUUDET

IS JOBST® VÖRUEIGINLEIKAR

ET JOBST® TOOTE OMADUSED



- EN High edema containment
DE Starke Ödem-Eindämmung
FR Contention élevée pour gestion de l'œdème
ES Alta contención del edema
PT Alta contenção do edema
IT Alto livello di contenimento degli edemi
NL Goede ondersteuning bij oedeem



- EN SoftTouch
DE Weicher Griff
FR Toucher doux
ES Toque suave
PT Toque macio
IT Soft touch
NL Voelt zacht aan
SV Mjuk känsla
NO Myk følelse



- EN Breathable
DE Atmungsaktiv
FR Respirant
ES Transpirable
PT Respirável
IT Traspirante
NL Ademend
SV Andas
NO Pustende

LT JOBST® PREKĖS SAVYBĖS

LV JOBST® PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

PL CECZY PRODUKTÓW JOBST®

HU JOBST® TERMÉKJELLEMZŐK

RO CARACTERISTICI ALE PRODUSELOR JOBST®

CS FUNKCE PRODUKTU JOBST®

SL LASTNOSTI IZDELKA JOBST®

SK VLASTNOSTI VÝROBKU JOBST®

RU ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ JOBST®

TR JOBST® ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

AR JOBST® مميزات المنتج

HE JOBST® התכונות של מוצר

- SV Hög ödeminnehållning
NO Høy ødemkontroll
DA Effektiv indeslutning af ødem
FI Turvotusta tiukasti rajoittava
IS Afmarkar bjúg með göðum árangri
ET Suur tursevähendusvõime
LT Geras edemos sulaiikymas
LV Īpaši efektīva tūskas kontrole
PL Mocny ucisk obrzęku
HU Fokozott ödéma elleni hatás
- RO Efect ridicat de restrângere a edemului
CS Vysoký stupeň omezení edému
SL Visoka stopnja obvladovanja edema
SK Vysoká miera zadržiavania opuchu
RU Высокий уровень ограничения отеков
TR Yüksek ödem kısıtlaması
AR احتواء تام للورمة
HE תמיכה חזקה לבעקות

- DA Blød følelse
FI Pehmeäiltä tuntuva
IS Mjúkt
ET Pehme
LT Minkštas
LV Mīksts
PL Miękkie w dotyku
HU Puha tapintású
RO Moale la atingere

- DA Åndbar
FI Hengittävä
IS Andar
ET Hingav
LT Leidžiantis kvėpuoti
LV Elpojošs
PL Oddychające
HU Lélegző
RO Material respirabil

- CS Jemné na dotek
SL Mehke na dotik
SK Jemné na dotyk
RU Приятный на ощупь
TR Yumuşak
AR ذات ملمس ناعم
HE מגע רך

- CS Prodyšné
DE Strapazierfähig
FR Durable
ES Durable
PT Resistente
IT Durevole
NL Duurzaam
SV Hållbar
NO Holdbar

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS JOBST®



- EN Easy donning
DE Einfaches Anziehen
FR Enfilage facile
ES Fácil de poner
PT Fácil de vestir
IT Facile da indossare
NL Makkelijk aan te trekken
SV Enkel påtagning

- NO Enkel å ta på
DA Nem påsætning
FI Helppo pukea
IS Auðvelt að setja á sig
ET Lihtne jalgapanek
LT Paprasta apsimaui
LV Ērti uzvilkt
PL Łatwe zakładanie
HU Könnyen felhúzható

- RO Uşor de îmbrăcat
CS Snadné nasazení
SL Enostavno oblačenje
SK Jednoduché nasadenie
RU Простота надевания
TR Kolay takılır
AR سهولة الارتداء
HE לבישה קלה

- EN Left or right
DE Rechts oder links
FR Gauche ou droite
ES Derecha o izquierda
PT Esquerda ou direita
IT Per arto sinistro o destro
NL Voor links of rechts
SV För vänster eller höger
NO For venstre eller høyre
DA Til venstre eller højre

- FI Vasempan tai oikeaan
IS Fyrir vinstri eða hægri
ET Vasak või parem
LT Nešiojamas kairėje arba dešinėje
LV Kreisajai vai labajai pusei
PL Lewa lub prawa kończyna
HU Jobb vagy bal oldalra
RO Putare pe stânga sau dreapta

- CS Pravá nebo levá strana
SL Za levo ali desno stran
SK Lavé alebo pravé
RU Подходит и для правой, и для левой
TR Sağ veya sol taraf için
AR يمكن ارتداؤها على الأيمن أو الأيسر
HE לשמאל או לימין

- EN Seamless
DE Nahtlos
FR Sans couture
ES Sin costura
PT Sem costuras
IT Senza cuciture
NL Zonder naden
SV Sömlös
NO Sømless

- DA Sømmøs
FI Saumaton
IS Samfellt
ET Õmblusteta
LT Be siūlių
LV Bez šuvēm
PL Bezzwowe
HU Varrás nélküli
RO Fără cusături

- CS Bezešvé
SL Brezšivne
SK Bez švov
RU Бесшовный
TR Dikişsiz
AR ارتداء سلس
HE ללא תפרים

- EN Durable
DE Strapazierfähig
FR Durable
ES Durable
PT Resistente
IT Durevole
NL Duurzaam
SV Hållbar
NO Holdbar

- DA Holdbar
FI Kestävä
IS Endingargott
ET Endustipdav
LT Patvarus
LV Izturīgs
PL Trwały
HU Tartós
RO Material rezistent

- CS Odolné
SL Trpežne
SK Odolné
RU Прочный
TR Dayanıklı
AR متينة
HE עמיד

INSTRUCTIONS FOR USE

EN

JOBST® Bella Lite & Strong Ready-to-Wear Armsleeve

JOBST® Bella Lite: 15-20 mmHg and 20-30 mmHg

JOBST® Bella Strong: 15-20 mmHg, 20-30 mmHg and 30-40 mmHg

UK: Class 1 (CI 1) = 15-20 mmHg, Class 2 (CI 2) = 20-30 mmHg, Class 3 (CI 3) = 30-40 mmHg

Your healthcare professional has recommended this JOBST® Bella Armsleeve for the management of your lymphedema or other edema.

Indications

Every JOBST® medical compression product has a specific compression level designed to help specific venous and lymphatic conditions.


The compression level is printed on the package label. The required compression class must be determined by your physician.

For the management of lymphedema and other edema. Phlebitis, post thrombotic syndrome, vascular malformation. JOBST® Bella Lite and JOBST® Bella Strong 20-30 mmHg for post liposuction management.

Post surgery management and management of oedema (20-30 mmHg JOBST® Bella Lite only).

Instructions for Donning JOBST® Bella Lite Armsleeve


1. Fold armsleeve on itself, from the top down. Note positioning of the wide band. Insert hand.
2. Gently pull complete armsleeve on to the elbow. The armsleeve should now be positioned over the wrist and elbow portion of the arm.
3. Gently pull the top of the armsleeve up to its correct end location (top of the arm).
4. Smooth out any wrinkles or folds that may appear.

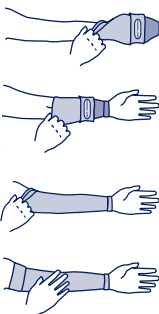


Optional: A donning aid may be used to help slide the sleeve over your hand.

Instructions for Donning JOBST® Bella Strong Armsleeve

1. Pull Donning Aid onto arm.

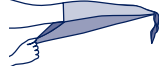

2. Fold back band on armsleeve so silicone is exposed.
3. Pull armsleeve onto arm until wrist cuff is on or above wrist bone.
4. Place loop over door knob or other secure, stationary object. Holding silicone band in place, slowly step away from door - allowing Donning Aid to be removed. Adjust armsleeve as needed.
5. Flip silicone band into place using a donning glove to adjust the armsleeve as needed.

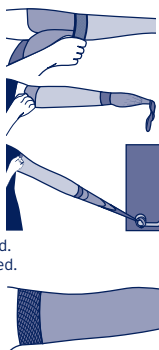

JOBST® Bella Lite & Strong Ready-to-Wear Gauntlet

15-20 mmHg and 20-30 mmHg

UK: Class 1 (CI 1) = 15-20 mmHg, Class 2 (CI 2) = 20-30 mmHg

Your healthcare professional has recommended this JOBST® Bella Gauntlet for the management of your lymphedema or other edema.

Indications

Every JOBST® medical compression product has a specific compression level designed to help specific venous and lymphatic conditions.

The compression level is printed on the package label. The required compression class must be determined by your physician.

For the management of lymphedema and other edema.

Instructions for Donning

1. Slip fingers into gauntlet starting at the end that has the widest band.
2. Position gauntlet so that it sits comfortably around the palm and thumb.
3. The gauntlet should be positioned so that it ends around the knuckles.



JOBST® Bella Lite & Strong Ready-to-Wear Glove

15-20 mmHg and 20-30 mmHg

Your healthcare professional has recommended this JOBST® Bella Glove for the management of your lymphedema or other edema.

Indications

Every JOBST® medical compression product has a specific compression level designed to help specific venous and lymphatic conditions.

INSTRUCTIONS FOR USE

EN

The compression level is printed on the package label. The required compression class must be determined by your physician.

Bella Lite Glove 15-20, 20-30: For the control of mild to moderate hand swelling from acute and chronic edema, lymphatic and other swelling disorders.

Bella Strong Glove 15-20: For the control of mild hand swelling from acute and chronic edema, lymphatic and other swelling disorders.

Bella Strong Glove 20-30: For the control of moderate to severe hand swelling from acute and chronic edema, lymphatic, and other swelling disorders.

Follow your healthcare provider's instructions.

Instructions for Donning JOBST® Bella Lite Glove

Open wounds should be covered before applying glove. Remove jewelry before applying. The glove can be used on either hand:

- A. Right hand: label is visible on the wrist.
- B. Left hand: turn the glove "inside out", inverting the fingers. The label is on the inside.

Follow these steps when putting on your glove:

1. Slip fingers into glove.
2. Position glove so that it sits comfortably around the palm and thumb.
3. The glove should be positioned so that the fingers end near the beds of the fingernails.
4. If the finger lengths are too long, mark the finger at the appropriate length, remove the glove, then trim the length of the glove finger directly above the marked area and remove the loose thread to lock down the seam. Be careful not to remove too much of the finger length.



Instructions for Donning JOBST® Bella Strong Glove

Follow these steps when putting on your glove:

1. Slip your hand through the wrist of the glove and into the fingers.
2. Adjust the fingers by carefully pulling on the fabric until the glove fits snugly into the web spaces between your fingers.
3. Be sure the fabric is smoothed out over the fingers and hand.



JOBST® Bella Lite Ready-to-Wear Combined Armsleeve

15-20 mmHg and 20-30 mmHg

Your healthcare professional has recommended this JOBST® Bella compression garment for the management of your lymphedema or other edema.

Indications


Every JOBST® medical compression product has a specific compression level designed to help specific venous and lymphatic conditions.

The compression level is printed on the package label. The required compression class must be determined by your physician.

For the management of lymphedema and other edema. Phlebitis, post thrombotic syndrome, vascular malformations, post liposuction (20-30 mmHg only).

Instructions for Donning

1. Fold armsleeve part on itself, from the top down. Slip fingers into gauntlet and position it so that it sits comfortably around the palm and thumb.
2. Gently pull complete armsleeve part on to the elbow. The armsleeve part should now be positioned over the wrist and elbow portion of the arm.
3. Gently pull the top of the Armsleeve part up to its correct end location (top of the arm).
4. Smooth out any wrinkles or folds that may appear.

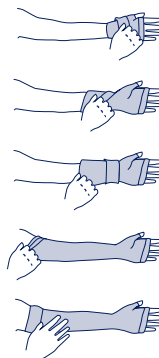

Contraindications

JOBST® Bella Lite & Strong

JOBST® medical compression garments should not be worn in cases of:

- Advanced arterial insufficiency including ischemia
- Uncontrolled congestive heart failure
- Untreated septic phlebitis
- Phlegmasia coerulea dolens
- Incompatibility to fabric

Cautions JOBST® Bella Lite & Strong

- Weeping dermatosis
- Cutaneous infections
- Open wounds must be covered with an appropriate dressing before the compression garment is put on

INSTRUCTIONS FOR USE

EN

- Severely compromised skin sensibility and impaired sensitivity of the limb
- Advanced peripheral neuropathy
- Immobility (confinement to bed). Not recommended to wear during bed rest
- Conditions in which increased venous and lymphatic return is not desired.
- Appropriate hygiene and skin care should be applied
- Ill-fitting compression garments may cause constriction leading to e.g. skin necrosis, pressure ulcers and pressure related peripheral nerve damage
- The attending physician decides whether compression in general can be applied in patients suffering from the following diseases: rheumatoid arthritis, complex regional pain syndrome, CRPS (M. Sudeck), malignant lymphedema, gangrene.
- Medical compression garments should only be used after consultation with your doctor or therapist and checked regularly by them on the appropriateness of your therapy, also considering age and health status.
- Patient measurements should be taken by a trained person to determine the correct product size needed and to decide whether a made-to-measure or ready-to-wear garment is required.
- When re-ordering a garment after 6 month we recommend to take the patients measurements again as the limb circumference might have changed.
- If you notice discomfort, pain, numbness, changes in skin color, appearance of new wounds or swelling during wear, stop using the product and contact your healthcare professional.

- Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to BSN medical Inc. (BSN-JOBST® GmbH within the European Union) and the competent authority of your state.

Care Instructions

JOBST® Bella Lite & Strong



Machine washable in warm water. Mild process. Use a delicate fabric detergent. Do not use fabric softener. Do not bleach. Tumble drying possible. Low temperature; exhaust temperature max. 50 °C. Do not iron. Do not dry clean. Flat drying. Drip line drying in the shade.

Special Care Instructions for JOBST®

Bella Armsleeves with Silicone band

1. Before washing the garment, turn the garment inside out.
2. Thoroughly hand wash the silicone band using a delicate fabric detergent. Concentrate on removing any lotion, powder or hair from the silicone.

The use of certain skin care products, dry peeling skin or use in hairy areas, may prevent the silicone band from keeping the garment in place.

JOBST® garments will retain their compression for 6 months under normal wear and care.

Please protect your compression garments from direct exposure to sunlight, heat, and moisture. We recommend storage at room temperature.

Indikationen

Jedes JOBST® medizinisches Kompressionsprodukt hat eine spezifische Kompressionsklasse für die Behandlung bestimmter venöser und lymphatischer Erkrankungen.

Die Kompressionsklasse ist auf dem Verpackungsetikett aufgedruckt. Die Kompressionsklasse muss durch den Arzt bestimmt werden.

Zur Behandlung von Lymphödem und anderen Ödemen. Phlebitis, postthrombotisches Syndrom, Gefäßmissbildungen. JOBST® Bella Lite und

GEBRAUCHSANWEISUNG

DE

JOBST® Bella Strong 20-30 mmHg zur Behandlung nach einer Fettabsaugung.

Postoperative Behandlung und Behandlung von Ödemen (nur 20-30 mmHg JOBST® Bella Lite).

Anziehanleitung JOBST® Bella Lite

1. Ziehen Sie den Armstrumpf bis zur Hälfte auf links, und zwar von oben nach unten. Das breite Abschlussband muss sich außen befinden. Schieben Sie Ihre Hand in den Armstrumpf.



2. Ziehen Sie den Armstrumpf vorsichtig bis zum Ellenbogen hoch. Der Armstrumpf sitzt nun zwischen Handgelenk und Ellenbogen.



3. Ziehen Sie jetzt den oberen Teil des Armstrumpfes bis zur vorgesehenen Stelle am Oberarm.
4. Streichen Sie eventuelle Falten glatt.



Alternative: Sie können den Armstrumpf auch mit einer Anziehhilfe anziehen.

Anziehanleitung JOBST® Bella Strong

1. Ziehen Sie die An- und Ausziehhilfe über den Arm.
2. Ziehen Sie das Band an der Armmanschette zurück, sodass das Silikon freiliegt.



3. Ziehen Sie die Armmanschette über den Arm, bis die Handgelenksmanschette am oder über dem Handgelenksknochen liegt.



4. Legen Sie die Schlaufe über eine Türklinke oder ein anderes sicher befestigtes Objekt. Halten Sie das Silikonband an Ort und Stelle und entfernen Sie sich langsam von der Tür, sodass die An- und Ausziehhilfe entfernt werden kann. Passen Sie die Armmanschette nach Ihren Wünschen an.



5. Positionieren Sie das Silikonband mithilfe eines An- und Ausziehhandschuhs, um die Armmanschette nach Ihren Wünschen anzupassen.



JOBST® Bella Lite & Strong Handteil 15-20 mmHg und 20-30 mmHg

Ihr Arzt/Therapeut hat Ihnen diesen JOBST® Bella Handteil zur Behandlung Ihres Lymphödems oder eines anderen Ödems empfohlen.

Indikationen


Jedes JOBST® medizinisches Kompressionsprodukt hat eine spezifische Kompressionsklasse für die Behandlung bestimmter venöser und lymphatischer Erkrankungen.

Die Kompressionsklasse ist auf dem Verpackungsetikett aufgedruckt. Die Kompressionsklasse muss durch den Arzt bestimmt werden.

Zur Behandlung von Lymphödem und anderen Ödemen.

Anziehanleitung JOBST® Bella Lite & Strong Handteil

1. Schieben Sie Ihre Hand an der Stelle in das Handteil, an der sich der breite Abschlussrand befindet.
2. Ziehen Sie das Handteil so weit an, bis er an Handfläche und Daumen bequem sitzt.
3. Das Handteil sollte an den Fingergrundgelenken enden.

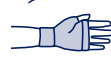

JOBST® Bella Lite & Strong Standardhandschuh 15-20 mmHg und 20-30 mmHg

Ihr Arzt/Therapeut hat Ihnen diesen JOBST® Bella Handschuh zur Behandlung Ihres Lymphödems oder eines anderen Ödems empfohlen.

Indikationen

Jedes JOBST® medizinisches Kompressionsprodukt hat eine spezifische Kompressionsklasse für die Behandlung bestimmter venöser und lymphatischer Erkrankungen. Die Kompressionsklasse ist auf dem Verpackungsetikett aufgedruckt. Die Kompressionsklasse muss durch den Arzt bestimmt werden.

Bella Lite Handschuh 15-20, 20-30: Zur Kontrolle leichter bis mittelschwerer Schwellungen der Hand durch akute und chronische Ödeme, Lymphödem und andere Schwellungsstörungen.

Bella Strong Handschuh 15-20: Zur Kontrolle leichter Schwellungen der Hand durch akute und chronische Ödeme, Lymphödem und andere Schwellungsstörungen.

Bella Strong Handschuh 20-30: Zur Kontrolle mittelschwerer bis schwerer Schwellungen der Hand durch akute und chronische Ödeme, Lymphödem und andere Schwellungsstörungen. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes.

GEBRAUCHSANWEISUNG

DE

JOBST® Bella Lite & Strong Standardarmstrumpf

JOBST® Bella Lite: 15-20 mmHg und 20-30 mmHg

JOBST® Bella Strong: 15-20 mmHg, 20-30 mmHg und 30-40 mmHg

Ihr Arzt/Therapeut hat Ihnen diesen JOBST® Bella Standardarmstrumpf zur Behandlung Ihres Lymphödems oder eines anderen Ödems empfohlen.