



SenSura[®] Mio 2-piece Flex

Pictorial instructions for use

SenSura[®] Mio

 **Coloplast**


Abbreviated instructions for use. Please refer to product labeling for complete product instructions for use, contraindications, warnings, precautions and adverse events.

Prepare — 1




Measure the stoma.

Prepare — 2

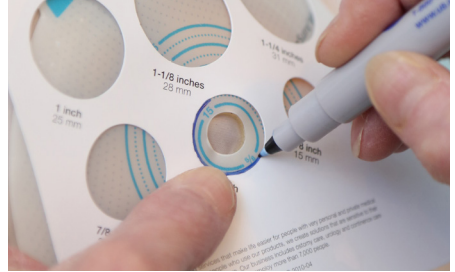

Trace measurement onto back of the barrier.

Prepare — 3

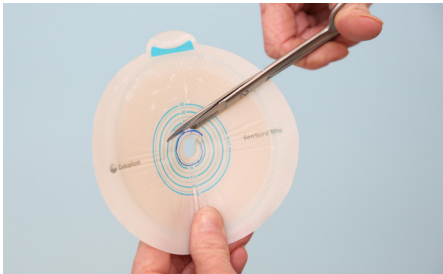


Cut opening in the barrier.



Remove protective backing by pulling the turquoise release tab away from the barrier.

Apply — 1

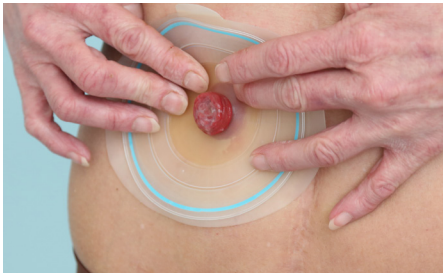

Center barrier around stoma.
Secure to skin by applying gentle pressure.


Apply — 2



Remove the protective paper from the adhesive ring on the pouch.

For product support, call the Coloplast Consumer Care Team at 1-877-858-2656.

Apply — 3

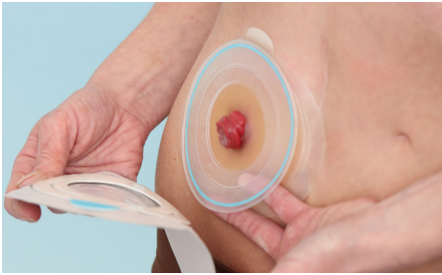

Place pouch by aligning the bottom edge of the adhesive ring with the turquoise line at the bottom of the floating baseplate.

Apply — 4



Secure pouch by applying gentle pressure around the baseplate. When pouch is $\frac{1}{3}$ to $\frac{1}{2}$ full, proceed to either empty or remove.

For drainable pouches only

Empty — 1



Open the outlet by lifting both tabs off the Velcro® plate. Unfold outlet.

Empty — 2



Fold back lower plate to avoid soiling when emptying. Attach Velcro® dots to hold plate in place.

Empty — 3




Empty pouch by pinching outer edges of the outlet open.

Empty — 4



Clean the outlet.

Close — 1

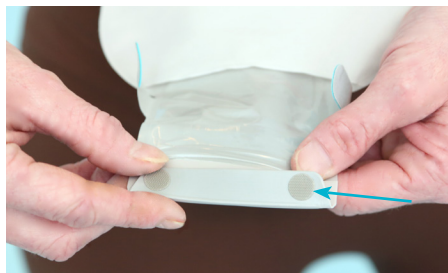


Release the Velcro® dots. Using the guide, fold the lower plate over the upper plate.

Close — 2



Fold upward. Seal the outlet by attaching the Velcro® tabs onto the Velcro® plate.

Remove - 1

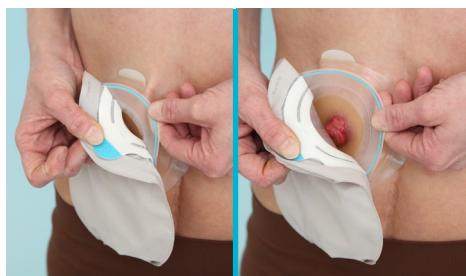

Remove pouch by using the turquoise tab located on the adhesive ring and gently pull down and away.

Remove - 2



Use the white tab to gently pull the barrier away from the skin using the "push-pull" technique.


Features

Hide-away



Hide-away: Tuck sealed outlet up and under the protective pocket.

For extra discretion: Adhere the closed outlet on a drainable pouch to the Velcro® dot near inspection window.

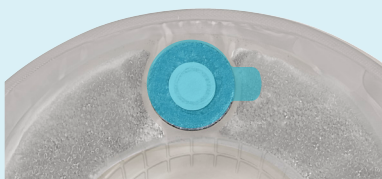

Apply teal sticker to exposed part of the filter, on the back of the pouch, before showering, swimming or submerging in water. Remove sticker when done. Stickers come in the box of pouches.



The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S.
© 2017 Coloplast Corp. All rights reserved.
Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.



SenSura[®] Mio Flex de 2-piezas

Instrucciones de uso con imágenes

SenSura[®] Mio

 Coloplast


Instrucciones de uso abreviadas. Consulte el prospecto del producto para conocer las instrucciones completas para su uso, las contraindicaciones, las advertencias, las precauciones y los eventos adversos.

Prepare — 1




Mida el estoma.

Prepare — 2

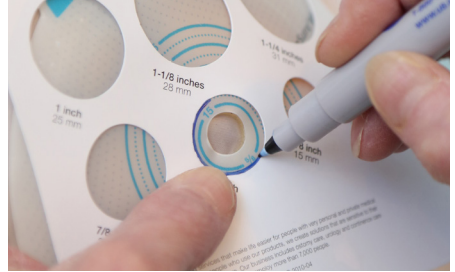

Marque la medición en la parte trasera de la barrera.

Prepare — 3

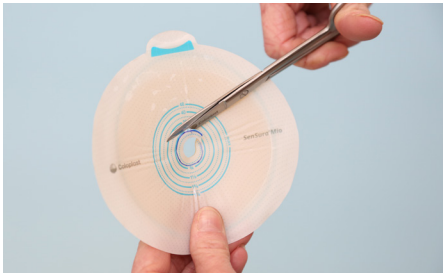


Corte una abertura en la barrera.

Prepare — 4



Retire el reverso protector tirando de la pestaña de liberación de color turquesa en dirección opuesta a la barrera.

Aplique — 1

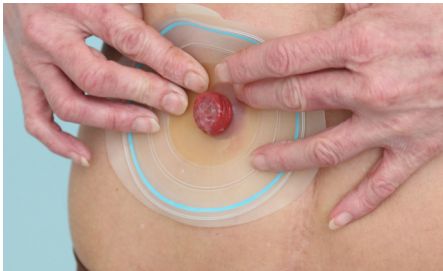

Centre la barrera alrededor del estoma. Fije a la piel ejerciendo una presión suave.


Aplique — 2



Quite el papel protector del anillo adhesivo sobre la bolsa.

Para obtener asistencia con respecto al producto, llame al Equipo de Cuidado del Consumidor de Coloplast al 1-877-858-2656.

Aplique — 3

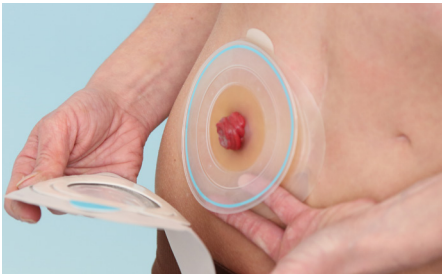

Coloque la bolsa mediante la alineación del borde inferior del anillo adhesivo con la línea de color turquesa en la parte inferior de la placa base flotante.

Aplique — 4



Fije la bolsa ejerciendo una presión suave alrededor de la placa base. Cuando la capacidad de la bolsa esté entre $\frac{1}{3}$ a $\frac{1}{2}$ llena, proceda a vaciarla o quitarla.

Para bolsas con drenaje solamente

Vacíe — 1



Abra la salida tirando de ambas pestañas hacia arriba de la placa de Velcro®. Despliegue la salida.

Vacíe — 2



Pliegue hacia atrás la placa inferior para evitar ensuciarse durante el vaciado. Una los puntos de Velcro® para sujetar la placa en su lugar.

Vacíe — 3




Vacíe la bolsa tomando los bordes externos de la salida y manteniéndolos abiertos.

Vacíe — 4



Limpie la salida.

Cierre — 1

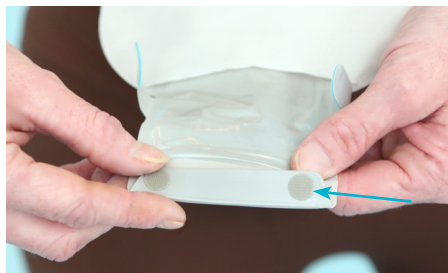


Suelte los puntos de Velcro®. Mediante el uso de la guía, doble la placa inferior sobre la placa superior.

Cierre — 2



Doble hacia arriba. Selle la salida mediante la colocación de las pestañas de Velcro® sobre la placa de Velcro®.

Quite — 1

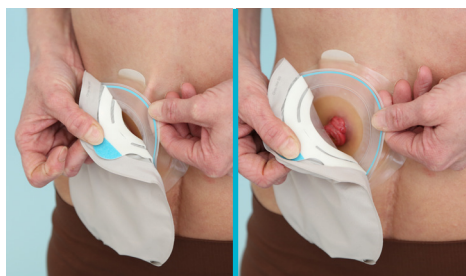

Quite la bolsa usando la pestaña azul ubicada sobre el anillo adhesivo y tirando suavemente hacia abajo y hacia afuera.

Quite — 2



Use la pestaña de color blanco para retirar la barrera de la piel mediante una técnica de "empuje-tire".



El logotipo de Coloplast es una marca comercial registrada de Coloplast A/S.
© 2017 Coloplast Corp. Todos los derechos reservados.
Velcro® es una marca comercial registrada de Velcro Industries B.V.


Características

Ocular



Ocular: Lleve la salida sellada hacia arriba y hacia abajo del bolsillo de protección.

Para mayor discreción: Adhiera la salida cerrada sobre una bolsa con drenaje al punto de Velcro® próximo a la ventana de inspección.

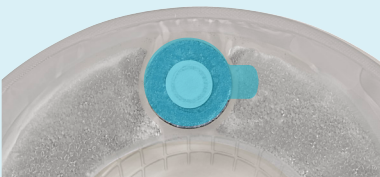

Aplique la etiqueta engomada de color verde azulado a la parte expuesta del filtro, en la parte posterior de la bolsa, antes de ducharse, nadar o sumergirse en el agua. Retire la etiqueta cuando haya terminado. Las etiquetas engomadas se proveen dentro de la caja de las bolsas.