

Intelli-Flo Polar Pad Ankle FITTING INSTRUCTIONS

for Patients and Medical Professionals

⚠ WARNING

The Intelli-Flo Polar Pad can be cold enough to seriously injure the skin. The Intelli-Flo Polar Pad is non-sterile and for single patient use only. Do not attempt to sterilize the Pad. Follow these instructions and the Operating Instructions and Product Inserts provided with the Polar Care Kodiak Motorized cold therapy units (available at www.breg.com or 1-800-321-0607).

1. **Discuss treatment with your licensed health care practitioner.** Provide a complete medical history including any reactions to cold. Certain medical conditions make cold-induced injury more likely. Ask your practitioner about potential adverse reactions and cold-induced injuries.
2. **Use only according to your practitioner's instructions** regarding the frequency and duration of cold application and breaks, proper temperature, how and when to inspect the skin, and total length of treatment. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed health care practitioner.
3. **Apply an insulation barrier** (such as BREG Polar Dressing, Webril, Kerlix, cast padding, elastic bandage) that provides complete coverage between the Intelli-Flo Polar Pad and skin. **Do not let any part of the Intelli-Flo Polar Pad touch skin.** If a sterile dressing has been applied to the treatment site that does not completely cover the skin under the pad, use an additional insulation barrier. The Intelli-Flo Polar Pad alone is too cold to be applied directly to the skin.
4. **Apply the Intelli-Flo Polar Pad** with the gray plastic channeled side towards the skin. Refer to the graphics below. Do not wrap pad so tightly as to restrict normal circulation, as this can cause injury.
5. **Connect the Intelli-Flo Polar Pad** couplings to the Polar Care Kodiak unit couplings. The Intelli-Flo Polar Pad hose couplings are only compatible with the Polar Care Kodiak unit couplings.
6. **Follow the Polar Care Kodiak Operating Instructions and Product Insert** inside the pouch; both are affixed to the unit.
7. **Inspect the skin** under the Intelli-Flo Polar Pad (by lifting the edge) as prescribed, typically every 1 to 2 hours. Do not use the Polar Care Kodiak if dressing, wrapping, bracing, or casting over the Intelli-Flo Polar Pad prevents skin inspections. Stop using and contact your practitioner immediately if you experience any adverse reactions, such as: increased pain, burning, increased swelling, itching, blisters, increased redness, discoloration, welts, other changes in skin appearance, or any other reaction identified by your practitioner.
8. **To end cold therapy,** disconnect electrical power and press the two metal tabs on the hose coupling and gently pull apart or remove the Intelli-Flo Polar Pad from your body.

INSTRUCTIONS D'INSERTION du coussinet pour chevilles Intelli-Flo Polar Pad

destinées aux patients et aux professionnels de la santé


⚠ AVERTISSEMENT

L'Intelli-Flo Polar Pad peut être froid au point de créer de sérieuses lésions cutanées. L'Intelli-Flo Polar Pad est non stérile et à patient unique. N'essayez pas de le stériliser. Suivez ces instructions, ainsi que le mode d'emploi et les notices des produits joints aux éléments de thérapie par le froid motorisés Polar Care Kodiak (disponibles sur www.breg.com ou en composant le 1-800-321-0607).

1. **Parlez de ce traitement avec votre médecin.** Faites-lui part de la totalité de vos antécédents médicaux, y compris des réactions au froid. Certaines conditions médicales augmentent l'occurrence de lésions dues au froid. Discutez avec votre médecin des effets indésirables potentiels, ainsi que des lésions dues au froid.
2. **Utilisez le coussinet en suivant bien les instructions de votre médecin** qui vous renseignera sur la fréquence, la durée et les intervalles d'application du coussinet, la température appropriée, la durée totale du traitement. Il vous expliquera aussi comment et quand examiner la peau. La loi fédérale américaine n'autorise la vente de ce dispositif que par un praticien habilité ou sur ordonnance de ce dernier.
3. **Appliquez une barrière d'isolation** (comme un pansement Polar BREG, Webril, Kerlix, un bandage de protection, un bandage élastique) qui assure une couverture totale entre l'Intelli-Flo Polar Pad et la peau. **Ne laissez aucune partie du Intelli-Flo Polar Pad toucher la peau.** Si un pansement stérile a été appliqué sur l'emplacement du traitement et que la peau n'est pas complètement couverte sous le coussinet, utilisez une barrière d'isolation supplémentaire. Le coussinet Intelli-Flo Polar Pad seul est trop froid pour être appliqué directement sur la peau.
4. **Appliquez le coussinet Intelli-Flo Polar Pad** avec le côté cannelé en plastique gris tourné vers la peau. Reportez-vous aux schémas ci-dessous. Prenez soin de ne pas entraver la circulation en serrant trop le coussinet, ceci pourrait causer des lésions.
5. **Connectez les raccords du coussinet Intelli-Flo Polar Pad** aux raccords de l'élément Polar Care Kodiak. Les raccords de tuyau du coussinet Intelli-Flo Polar Pad ne sont compatibles qu'avec les raccords de l'élément Polar Care Kodiak.
6. **Suivez le mode d'emploi collé sur l'élément Polar Care Kodiak et la notice du produit** qui se trouve dans la poche également collée sur l'élément.
7. **Examinez la peau** sous le coussinet Intelli-Flo Polar Pad (en soulevant le bord) comme votre médecin vous l'a indiqué, habituellement toutes les 1 à 2 heures. N'utilisez pas le Polar Care Kodiak si le pansement, l'enveloppement, l'appareillage ou le plâtrage qui recouvre le coussinet Intelli-Flo Polar Pad empêche de vérifier l'état de la peau. Si les effets indésirables suivants se manifestent, interrompez l'utilisation du produit et contactez immédiatement votre médecin : une douleur croissante, une sensation de brûlure, un gonflement croissant, des démangeaisons, des cloques, une rougeur croissante, une décoloration, des marques, d'autres altérations cutanées ou toute autre réaction remarquée par votre médecin.
8. **Pour arrêter la thérapie froide,** débranchez le courant électrique et appuyez sur les deux onglets en métal situés sur les raccords des tuyaux, puis défaites doucement le coussinet Intelli-Flo Polar Pad ou retirez-le.



Intelli-Flo Polar Pad Ankle with Polar Dressing and Polar Wrap

Coussinet pour chevilles Intelli-Flo Polar Pad avec pansement Polar et enveloppement Polar

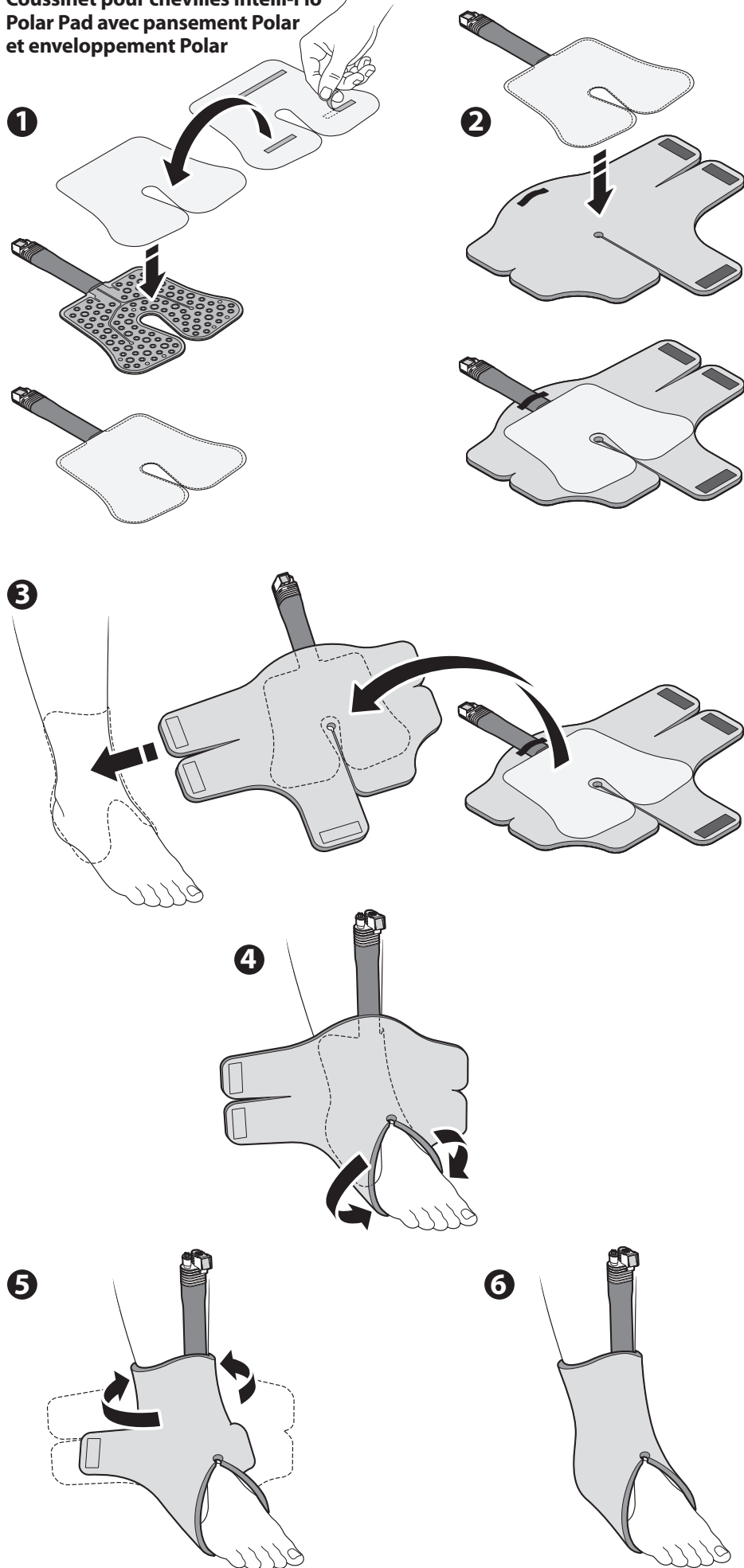

Intelli-Flo Polar Pad Ankle with Polar Dressing and elastic bandage

Coussinet pour chevilles Intelli-Flo Polar Pad avec pansement Polar et bandage élastique

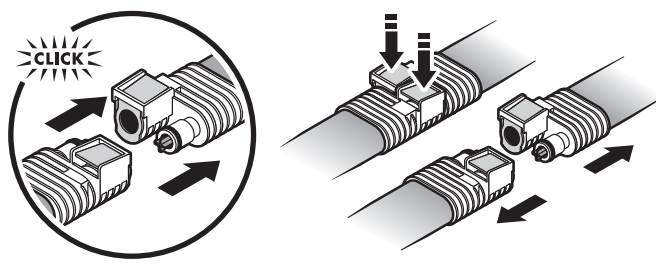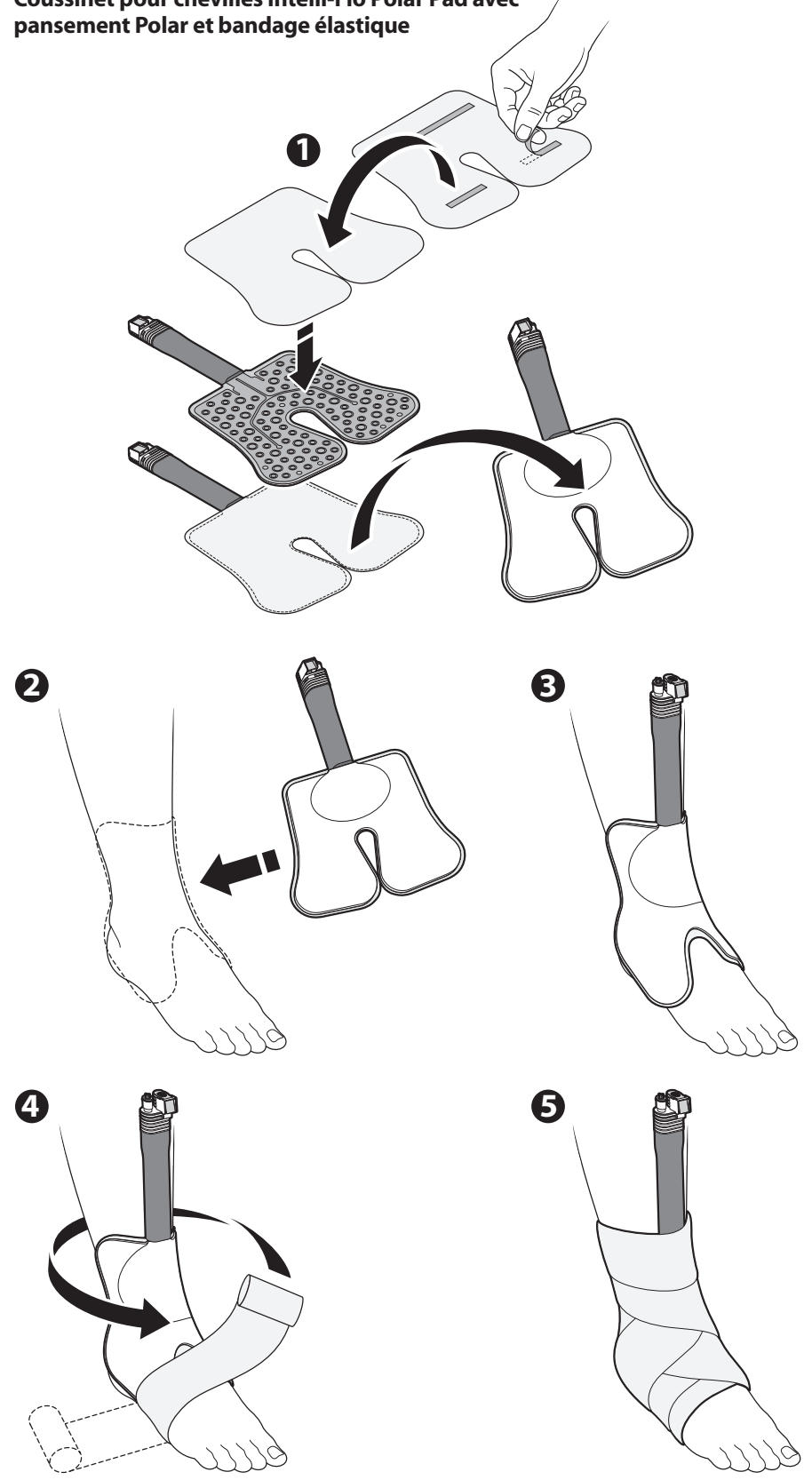

BREG
an Orthofix Company
BREG Inc.
Vista, CA 92081 U.S.A.
WWW.BREG.COM
Vista, CA 92081 U.S.A.
Telephone (800) 321-0607
(760) 599-3000
Telefax (800) 329-2734
AW-1.90218 REV A