

SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTE: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact carrier/dealer for further instruction.

⚠ WARNING

- **DO NOT** use this product without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product or optional equipment. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- You should **ALWAYS** consult with your physician or therapist to determine proper adjustment and usage.
- Items should not protrude from the walker basket - otherwise, injury or damage may occur.
- **ALWAYS** test to see that the walker and attachments are properly and securely locked in place before using.
- **DO NOT** carry or place weight exceeding five pounds in the walker basket when attached to walker. This may cause the walker to tip forward.
- **NEVER** use the walker tray, walker basket and the walker pouch at the same time.
- **NEVER** use the walker basket as a means of support.
- **DO NOT** sit or push down on the walker basket when in use. This may cause the basket to collapse.
- Use extreme care when using this walker basket on a walker with swivel casters. The walker may tip resulting in possible injury or damage.
- **DO NOT** use with heavy duty walkers.

⚠ ACCESSORIES WARNING

- Invacare products are specifically designed and manufactured for use in conjunction with Invacare accessories. Accessories designed by other manufacturers have not been tested by Invacare and are not recommended for use with Invacare products.

Installing/Removing the Walker Basket

NOTE: Walker basket model 6096 may be used on 6240-A, 6240-JR, 6240-5F and 6240-JR5F walkers.

NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 1.

NOTE: To remove the walker basket, reverse this procedure.

NOTE: The installation procedures differ for Adult and Junior walkers.

For Adult Walker Models 6240-A and 6240-5F:

1. With the walker basket on the outside of the walker, put the top hook on the upper pivot brace.
2. Engage the lower S-hooks onto the lower pivot brace on the Adult walker. Refer to Detail "B".

NOTE: Make sure that the hooks are completely seated on the upper and lower pivot braces and the walker basket sits level.

3. Wrap the strap around the lower pivot brace and through the walker basket. Continue wrapping until the entire length of the strap is around the lower pivot brace. Apply slight pressure to the end of the strap to secure it in place.

NOTE: Make sure that the strap is wrapped completely around the lower pivot brace and that the end of the strap is secure before use.

For Junior Walker Models 6240-JR and 6240-JR5F:

1. With the walker basket on the outside of the walker, put the top hook on the upper pivot brace.
2. Engage the upper S-hooks onto the lower pivot brace on the Junior walker. Refer to Detail "B".


NOTE: Make sure that the hooks are completely seated on the upper and lower pivot braces and the walker basket sits level.

3. Unfasten and move the strap to the second wire from the top of the walker basket. Refer to Detail "C". Secure the strap around the wire. Wrap the strap around the lower pivot brace and through the walker basket. Continue wrapping until the entire length of the strap is around the lower pivot brace. Apply slight pressure to the end of the strap to secure it in place.

NOTE: Make sure that the strap is wrapped completely around the lower pivot brace and that the end of the strap is secure before use.



DETAIL "B" - BASKET DETAILS

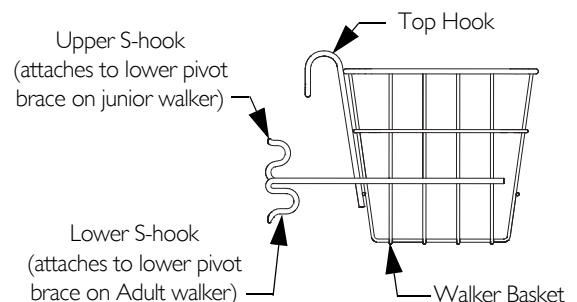

DETAIL "C" - STRAP LOCATION



FIGURE 1 Installing/Removing the Walker Basket

For more information regarding Invacare products, parts, and services, please visit www.invacare.com

Limited Warranty

Invacare warrants this product to be free from defects in materials and workmanship.

PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.

This warranty is extended only to the original purchaser/user of our products.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

Invacare warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for one year for the original purchaser. If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any such product. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back page. Provide dealer's name, address, model number, date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.

Invacare Corporation will use a return authorization. The defective unit or parts must be returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty days of return authorization date. **DO NOT** return products to our factory without our prior consent. C.O.D. shipments will be refused; please prepay shipping charges.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECTED TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS; PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN INVACARE DEALER, SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE.

THE FOREGOING EXPRESS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESS WARRANTIES WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THE SOLE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY WARRANTY WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. THE APPLICATION OF ANY IMPLIED WARRANTY WHATSOEVER SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY PROVIDED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.

THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

REMARQUE: Vérifiez toutes les pièces pour vous assurer qu'elles n'ont pas été endommagées en cours d'expédition. Si l'on remarque des dommages, NE PAS utiliser. Contactez le transporteur/concessionnaire pour de plus amples instructions.

⚠ AVERTISSEMENT

- **NE PAS** utiliser ce produit sans avoir d'abord entièrement lu et compris ces instructions et tous les autres documents comme les guides de l'utilisateur, les manuels d'entretien technique ou les feuilles d'instruction fournis avec ce produit ou l'équipement optionnel. Si vous n'êtes pas en mesure de comprendre les avertissements, mises en garde ou instructions, contactez un professionnel de santé, un concessionnaire ou un technicien avant de tenter d'utiliser cet équipement - autrement des blessures ou des dommages peuvent survenir.
- Vous devez **TOUJOURS** consulter votre médecin ou thérapeute pour déterminer l'ajustement et l'usage corrects.
- Rien ne doit dépasser du panier de la marchette - autrement, des blessures ou des dommages peuvent survenir.
- Vérifiez **TOUJOURS** que la marchette et les accessoires sont correctement et solidement en place avant l'utilisation.
- **NE PAS** transporter ou placer un poids excédant cinq livres dans le panier lorsqu'il est attaché à la marchette. Cela pourrait entraîner la chute de la marchette vers l'avant.
- **NE JAMAIS** utiliser le plateau, le panier et la pochette de la marchette en même temps.
- **NE JAMAIS** se servir du panier de la marchette pour se tenir en équilibre.
- **NE PAS** s'asseoir sur le panier ou appuyer dessus en cours d'utilisation, car cela pourrait l'endommager.
- Faites extrêmement attention en utilisant ce panier sur une marchette à roulettes orientables. La marchette peut se renverser, provoquant des blessures ou dommages éventuels.
- **NE PAS** utiliser avec des marchettes très lourdes.

⚠ AVERTISSEMENT À PROPOS DES ACCESSOIRES

- Les produits Invacare sont spécialement conçus et fabriqués pour être employés conjointement avec les accessoires Invacare. Les accessoires conçus par d'autres fabricants n'ont pas été testés par Invacare et il n'est pas recommandé qu'ils soient employés avec les produits Invacare.

Installer/retirer le panier pour marchette

REMARQUE: Le modèle de panier 6096 peut être utilisé sur les modèles de marchettes 6240-A, 6240-JR, 6240-5F et 6240-JR5F.

REMARQUE: Pour cette procédure, se référer à la FIGURE 1.

REMARQUE: Pour retirer le panier, inversez cette procédure.

REMARQUE: Les procédures d'installation diffèrent pour l'adulte et les marcheurs juniors.

Pour l'adulte le marcheur modèle 6240-A et 6240-5F :

1. Avec le panier de marcheur sur l'extérieur du marcheur, mettez le crochet supérieur sur le croisillon supérieur de pivot.
2. Engagez les S-crochets inférieurs sur le croisillon inférieur de pivot sur le marcheur d'adulte. Référez-vous au détail « B ».

REMARQUE: Assurez-vous que les crochets sont complètement posés sur le supérieur et les croisillons inférieurs de pivot et le panier de marcheur se repose de niveau.

3. Enveloppez la courroie autour du croisillon inférieur de pivot et par le panier de marcheur. Continuez de s'envelopper jusqu'à ce que la longueur entière de la courroie soit autour du croisillon inférieur de pivot. Appliquez-vous la légère pression à la fin de la courroie de la fixer en place.

REMARQUE: Assurez-vous que la courroie est enroulée complètement autour du croisillon inférieur de pivot et que la fin de la courroie est bloquée avant emploi.

Pour le marcheur junior modèle 6240-JR et 6240-JR5F :


1. Avec le panier de marcheur sur l'extérieur du marcheur, mettez le crochet supérieur sur le croisillon supérieur de pivot.
2. Engagez les S-crochets supérieurs sur le croisillon inférieur de pivot sur le marcheur junior. Référez-vous au détail « B ».

REMARQUE: Assurez-vous que les crochets sont complètement posés sur le supérieur et les croisillons inférieurs de pivot et le panier de marcheur se repose de niveau.


3. Desserrez et déplacez la courroie au deuxième fil à partir du dessus du panier de marcheur. Référez-vous au détail « C ». Fixez la courroie autour du fil. Enveloppez la courroie autour du croisillon inférieur de pivot et par le panier de marcheur. Continuez de s'envelopper jusqu'à ce que la longueur entière de la courroie soit autour du croisillon inférieur de pivot. Appliquez-vous la légère pression à la fin de la courroie de la fixer en place.

REMARQUE: Assurez-vous que la courroie est enroulée complètement autour du croisillon inférieur de pivot et que la fin de la courroie est bloquée avant emploi.

DÉTAIL « A » - DÉTAILS DE MARCHEUR

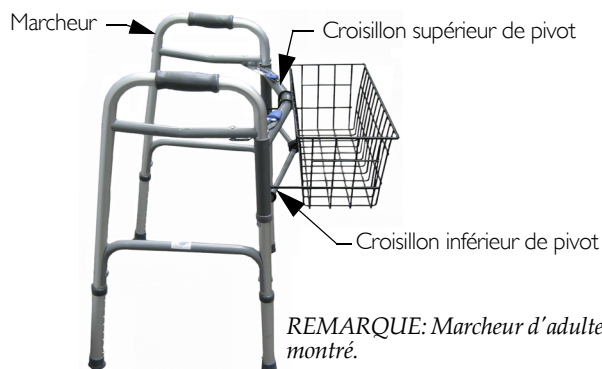

DÉTAIL « B » - DÉTAILS DE PANIER

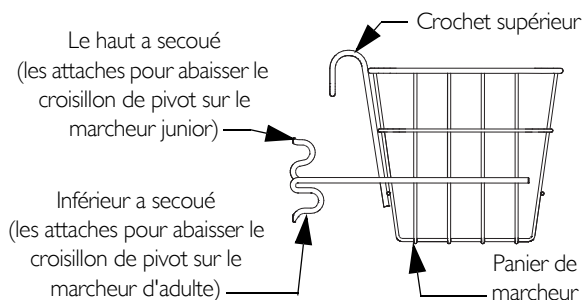

DÉTAIL « C » - ENDROIT DE COURROIE

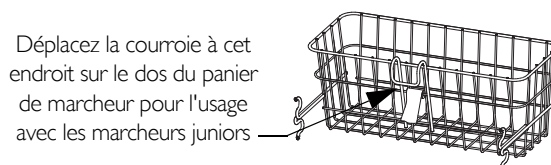


FIGURE 1 Installer/retirer le panier pour marchette

Pour plus de renseignements concernant les produits, les pièces et les services Invacare, veuillez visiter www.invacare.com

Garantie Limitée

Invacare garantit que ce produit est exempt de vices de matériel et de fabrication.

REMARQUE : LA GARANTIE PRÉSENTÉE CI-DESSOUS A ÉTÉ RÉDIGÉE EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI FÉDÉRALE APPLICABLE AUX PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE 4 JUILLET 1975.

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur/utilisateur initial de nos produits.

Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits juridiques qui varient d'état à état.

Invacare garantit que ce produit est exempt de vices de matériel et de fabrication pendant un an d'utilisation par l'acheteur original. Si durant cette période couverte par la garantie un produit s'avère avoir des défauts, il sera réparé ou remplacé à la discrétion d'Invacare. Cette garantie ne comprend pas la main-d'œuvre ou les frais d'expédition qui seraient occasionnés lors de l'installation de toute pièce de rechange ou de réparation dudit produit. L'obligation unique d'Invacare et votre recours exclusif selon cette garantie se limitent à une telle réparation ou à un tel remplacement.

Pour tout service couvert par la garantie, veuillez contacter le concessionnaire auprès duquel vous avez acheté votre produit Invacare. Dans le cas où vous n'obtiendriez pas satisfaction avec votre service de garantie, veuillez écrire directement à Invacare à l'adresse au dos de cette brochure. Fournissez-nous le nom et l'adresse de votre distributeur, le numéro du modèle, la date d'achat et indiquez la nature du défaut et, si le produit possède un numéro de série, indiquez-le également.

Invacare Corporation émettra une autorisation de retour. L'appareil ou les pièces défectueux doivent être renvoyés pour inspection de garantie en utilisant le numéro de série, le cas échéant, comme identification, dans les trente jours suivant la date d'autorisation.

Ne PAS renvoyer les produits à l'usine sans avoir obtenu préalablement notre accord.

Les expéditions en port dû seront refusées ; veuillez payer le fret d'avance.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS : LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PROBLÈMES DÉCOULANT DE L'USURE NORMALE OU SI LES INSTRUCTIONS CI-INCLUSES N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉES. EN OUTRE, LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS PORTANT DES NUMÉROS DE SÉRIE SI CES NUMÉROS ONT ÉTÉ SUPPRIMÉS OU EFFACÉS ; ELLE NE S'APPLIQUE PAS NON PLUS AUX PRODUITS QUI ONT ÉTÉ SUJETS À NÉGLIGENCE, ACCIDENTS, QUI ONT ÉTÉ UTILISÉS, ENTRETENUS OU STOCKÉS DE MANIÈRE INCORRECTE, AUX PRODUITS QUI ONT ÉTÉ MODIFIÉS SANS l'autorisation EXPRESSE ÉCRITE D'INVACARE, NOTAMMENT MAIS SANS S'Y LIMITER : MODIFICATION DU PRODUIT PAR L'EMPLOI DE PIÈCES OU D'AJOUTS NON AUTORISÉS ; DOMMAGES OCCASIONNÉS AU COURS DE RÉPARATIONS EFFECTUÉES SUR L'UNE DES PIÈCES SANS L'ACCORD SPÉCIFIQUE PRÉALABLE D'INVACARE ; DOMMAGES CAUSÉS PAR DES CIRCONSTANCES ÉCHAPPANT AU CONTRÔLE D'INVACARE ; PRODUITS RÉPARÉS PAR TOUTE PERSONNE AUTRE QU'UN CONCESSIONNAIRE D'INVACARE ; LA DÉTERMINATION RELATIVE AUX CONDITIONS CI-DESSUS SERA À LA DISCRÉTION EXCLUSIVE D'INVACARE.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN BUT PARTICULIER ET LE SEUL RECOURS POUR TOUTE INFRACTION À LA GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT, SE LIMITERA À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS CONTENUES AUX PRÉSENTES. L'APPLICATION D'UNE GARANTIE IMPLICITE QUELCONQUE NE POURRA PAS S'ÉTENDRE AU-DELÀ DE LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE CI-DESSUS. INVACARE NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT EN CAS DE DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES.

CETTE GARANTIE SERA ÉTENDUE POUR ÊTRE CONFORME AUX LOIS ET RÉGLEMENTATIONS DE L'ÉTAT/PROVINCE.

www.invacare.com



Yes, you can.

USA
One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44036-2125

Canada
570 Matheson Blvd E Unit 8
Mississauga Ontario
L4Z 4G4 Canada
800-668-5324

All rights reserved. Trademarks are identified by the symbols [™] and [®]. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation or its subsidiaries unless otherwise noted.

© 2009 Invacare Corporation

For customer service, call 800-333-6900.

Part No 1160834

Rev A - 07/09

