



## USER MANUAL



*Aromatherapy*  
**PERSONAL OXYGEN BAR**


Model # OXY03

# QUICK START GUIDE


## BEFORE USING THE OXYGEN BAR FOR THE FIRST TIME, FOLLOW THESE 3 STEPS:

### STEP 1: CUT OFF ALL SAFETY TIES FROM BOTTOM

- Using scissors, cut off the two(2) white safety ties from the bottom of the unit, making sure to remove all ties from the unit. Then discard the ties.

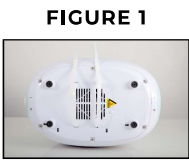

Find the two (2) white ties on bottom of machine

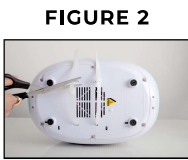

Cut both white ties, remove all ties from machine, and discard




Air vents should be clear of obstruction

### STEP 2: PLACE THE UNIT ON A HARD, FLAT SURFACE AND ATTACH HEADSET

- Place the unit on a stable, hard and flat surface such as a tabletop, tile floor, or desk.
- Do not place the unit on a carpet, rug, towel, or other soft surface to avoid overheating and damage.
- Attach the airflow tube to the front of the unit by gently pushing the end of the tube over the oxygen output nozzle (see Figure 4)

### STEP 3: TURN ON BOTH THE POWER SUPPLY **AND** OXYGEN FLOW

- Plug the AC adapter into the back of the unit (see Figure 5), and then plug into a nearby electrical outlet.
- Turn on the power supply using the switch on the back of the unit.
- To turn on the flow of oxygen, press the "OXYGEN ON/OFF" button on the LCD screen display panel or on the remote control.
- Both the power supply of the unit, **AND** the "OXYGEN ON/OFF" setting must be turned on for the oxygen flow to start.

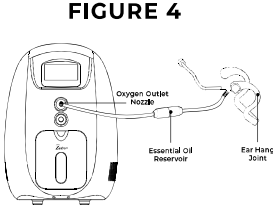

**ZADRO®**  
*Aromatherapy*  
**PERSONAL OXYGEN BAR**  
Model Number : OXY03

## Important Safety Instructions

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

ALL OF THE SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS SHOULD BE READ, ADHERED TO AND FOLLOWED BEFORE THE UNIT IS OPERATED.

THIS IS NOT A MEDICAL DEVICE , AND SHOULD NOT BE USED AS A REPLACEMENT FOR PRESCRIBED MEDICAL TREATMENTS.

### FOR HOUSEHOLD USE ONLY SAVE THESE INSTRUCTIONS




#### WHAT'S IN THE BOX

- Oxygen Bar (1)
- Remote Control (1)
- Headset (1)
- Nasal Tube Attachment (1)
- AC Adapter (1)
- Essential Oil (1)

#### SPECIFICATIONS

- Adjustable Oxygen Output Rate (at Sea Level):
  - 1L\* = 90% Oxygen Concentration
  - 2L\* = 75% Oxygen Concentration
  - 3L\* = 55% Oxygen Concentration
  - 4L\* = 45% Oxygen Concentration
  - 5L\* = 30% Oxygen Concentration
- Noise: < 45dB
- Rated Voltage: 120V
- Wattage Maximum: 130W
- Product Dimensions: 14.1" x 9.10" x 12.64"
- Weight: 14.33 lbs

#### SAFETY INFORMATION

-  **Caution** : Advice on how to get the best performance from the unit.
-  **Warning** : Important safety information for hazards that might cause serious injury or unit breakdown.
-  **Danger** : Urgent safety information for hazards that may cause serious injury or death.

## Caution



- THIS UNIT IS NOT FOR MEDICAL USE. It is designed for health maintenance.
- Do not block the ventilation port located on the bottom of unit.
- Do not set base on carpet or other soft surface. This could cause air flow restriction and damage to unit.
- For best performance, regularly clean the Intake Filter and panel located in the back of the unit.

## Warning



- DO NOT use the unit when there are any hazardous vapors or pesticide spray in the room.
- Do not leave the unit near heated areas. High heat will cause the plastic case to deform.
- During operation, do not press hard upon the external plastic tube as this will result in air flow restriction and damage to unit.
- Do not leave the unit unattended when turned on
- Do not use accessory attachments not recommended by Zadro as this may cause injury
- Do not alter the polarized plug in any way

## Caution



Check the electrical rating on the unit label and wall outlet before connecting the power cord.



When the power cord is found damaged or broken, return it to Zadro Products for examination or repair.



Infant, child, or disabled people should use under the watch of other adult to avoid accidental injury.



Do not reach for the unit in the event the unit falls into water. Unplug the unit immediately, then return it to Zadro Products for examination or repair.



Please remove the plug from electric outlet when not in use.



Keep the unit and all electrical cords away from heated surfaces or appliances. The oxygen will make the material flammable.



Do not use while bathing or with wet hands.



Do not to smoke or have open flames near the unit.

## INTRODUCTION

Restore your sense of calm, relaxation and overall well-being with Zadro's Aromatherapy Personal Oxygen Bar. It's quiet, compact, portable, and modeled after oxygen bars found in luxury resorts and spas that help increase self-care and overall well-being. Zadro's oxygen bar produces oxygen-enriched air through a quadruple air filtration system and French-imported molecular membrane that increases oxygen concentration up to 90% (compared to 21% oxygen concentration of normal air\*). Adjustable oxygen concentration from 30% oxygen up to 90% oxygen lets you control your relaxation experience. Choose to add essential oils to the oxygen for instant spa-like aromatherapy at home (lavender essential oil included)\*\*. Easily change the settings during your session with the convenient remote control. Enjoy peace of mind with 8 timer settings from 15 minutes up to 2 hours with auto-shutoff. Then enhance the purification of the oxygen with the optional negative ions booster function\*\*\*. If you're in a dry climate, use the optional water reservoir to infuse the purified oxygen with humidity. Relax with the oxygen bar while reading, at your desk, watching TV, in bed, or enjoying your hobbies. Simply wear the included headset or nose tube attachment for a gentle stream of oxygen.

## FEATURES

1. Experience luxurious spa-like aromatherapy during your session using essential oil of your choice or with the included lavender essential oil\*\*
2. 5 adjustable oxygen concentration settings from 30% oxygen up to 90% oxygen
3. Quadruple air filtration system and French-imported molecular membrane produces highly purified oxygen of up to 90% concentration
4. Auto shutoff timer with 8 timer settings from 15 minutes up to 2 hours
5. Personalize your experience using the digital LCD screen display panel or easily change the settings during your session with the convenient remote control (CR2025 battery included)
6. Enhance the oxygen purification with the optional negative ions booster function\*\*\*
7. If you're in a dry climate, use the optional water reservoir which infuses the purified oxygen with humidity
8. Enjoy less noise (<45 dB) from the unit for a peaceful experience
9. Internal overheat protection will automatically shut off the unit for safety
10. Plugs into a standard electrical outlet

\*\*Average 21% oxygen concentration of ambient air at sea level but can vary depending on location


\*\*Consult with a doctor or health care provider first before using any essential oils while pregnant or nursing

\*\*\*Consult with a doctor or health care provider first before incorporating negative ions into your oxygen session

## CONTROL PANEL DIAGRAM



## EXTERIOR DIAGRAM

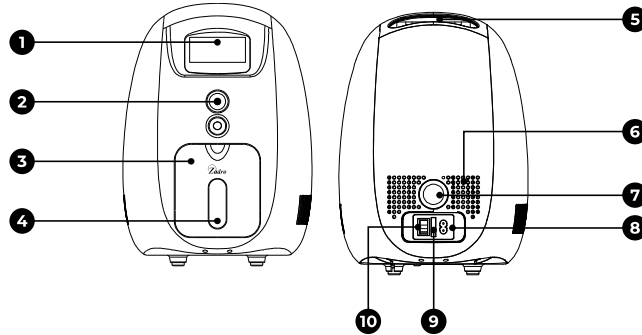


- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. LCD Screen Display   | 6. Heat Vents           |
| 2. Oxygen Outlet Nozzle | 7. Air Filter           |
| 3. Water Tank Panel     | 8. Power Jack           |
| 4. Water Reservoir      | 9. Fuse                 |
| 5. Top Handle           | 10. Power Supply Switch |


## 2 WAYS TO WEAR

- Choose either the headset or nasal tube and attach it to the end of the air flow tube.
- Place the headset or nasal tube attachment on your head and adjust to a comfortable position.
- If using the Headset: place it over your ears and adjust the flexible arm to be directly in front of your nose.
- If using the Nasal Tube Attachment: position the nasal tube with the nasal prongs facing upward and curved toward the face. Then insert the two nasal prongs into your nostrils and position until it's comfortable.

RECOMMENDED POSITIONING  
OF HEADSET

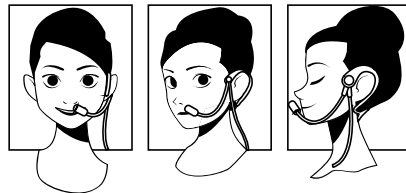

RECOMMENDED POSITIONING  
OF NASAL TUBE

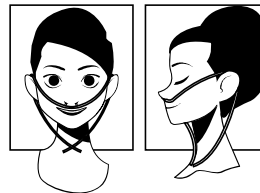

## ADJUSTABLE OXYGEN CONCENTRATION

1. Choose from 5 adjustable oxygen concentrations (based at sea level):
  - a. 1L\* = 90% Oxygen (highest concentration)
  - b. 2L\* = 75% Oxygen
  - c. 3L\* = 55% Oxygen
  - d. 4L\* = 45% Oxygen
  - e. 5L\* = 30% Oxygen (lowest concentration)
2. If this is your first time using an oxygen bar, we recommend starting at the lowest concentration (5L setting) then increasing the concentration over time.


\*L = Liter of air per minute

## TIMER SETTINGS

1. When the OXYGEN ON/OFF is turned on, press the up and down TIMER buttons on the LCD screen display panel on the front of the unit, or on the remote control.
2. Choose between the following 8 timer settings (the unit will auto shut off when the timer setting is finished):
  - o 15 minutes
  - o 30 minutes
  - o 45 minutes
  - o 1 hour
  - o 1 hour 15 minutes
  - o 1 hour 30 minutes
  - o 1 hour 45 minutes
  - o 2 hour

## AROMATHERAPY

- Use the aromatherapy reservoir to infuse the oxygen with your choice of essential oils (optional).
- Unscrew the reservoir located in the middle of the air tube by twisting until it completely detaches, add your desired amount of essential oil (2-4 drops are recommended), then screw the reservoir back together to lock into place.


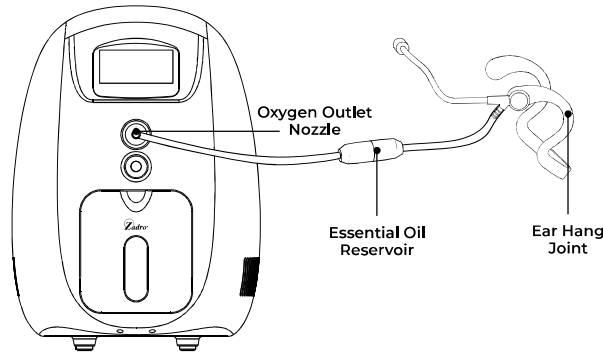


## BOOST A SETTING

1. Enhance the oxygen's purification with the Boost A setting (optional) which emits negative ions to further filter the air.
2. After the oxygen airflow is turned on, press the "BOOST A" button on the LCD screen display panel on the front of the unit, or on the remote control.

## HUMIDITY

1. If you're in a dry climate, you can increase the humidity within the oxygen flow by utilizing the humidity feature (optional).
2. Before turning on the unit, pull out the humidifier door and slide out the water tank cup. Then fill the cup with water up to the "MAX" fill line.
3. Turn on the power supply switch in the back of the unit, then press the "OXYGEN ON/OFF" button on the LCD screen display panel on the front of the unit, or on the remote control.
4. The water tank will automatically start when the OXYGEN ON/OFF button is pushed to turn on the airflow.
5. To refill the water tank, turn off the oxygen flow and power supply first before sliding out the water cup.

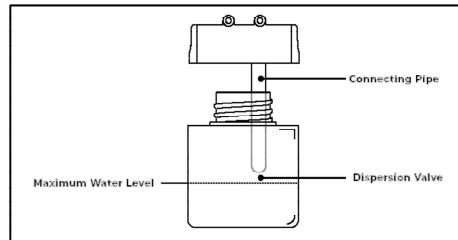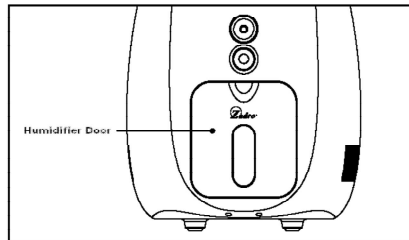

## MAINTENANCE



**DANGER**

TURN OFF THE UNIT AND REMOVE THE POWER CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE MAINTENANCE TO AVOID ELECTRICAL SHOCK.

### CLEANING THE HEADSET AND TUBES

1. Water condensation may form in the air flow tube and essential oil reservoir if using the oxygen bar in high humidity locations. Clean both pieces before storing the unit for long periods of time.
2. Rinse the airflow tube and essential oil reservoir with warm water and allow to air dry before storage or re-attaching the parts to the unit.

### CLEANING THE UNIT

1. Unplug the unit from electrical outlet. Wipe the unit with a soft clean cloth that's slightly damp with water, then wipe dry with a dry cloth. Do not use paper towels (fibers can get caught in the unit's vents).
2. Do not use washing detergents, benzene, thinner or alcohol.

### CLEANING THE WATER RESERVOIR

1. Open the water tank panel and slide out the water cup from the unit.
2. Rinse the cup with warm water and dry with a cloth before attaching back to the unit. Do not use washing detergents, benzene, thinner or alcohol.

### CLEANING THE ESSENTIAL OIL RESERVOIR

1. Twist to unlock the essential oil reservoir.
2. Rinse each piece of the reservoir with warm water. Do not use washing detergents, benzene, thinner or alcohol.

## TROUBLESHOOTING

### 1. The unit doesn't turn on.

- Check that the AC adapter is plugged into the back of the unit, and that it's also securely plugged into a nearby electrical outlet.
- Check that the AC adapter cord is undamaged.
- Check that your wall outlet is live and undamaged.
- Check if the fuse in the back of the unit is black or the wire is broken. If so, replace the fuse with a standard 5 amp fuse from a local hardware supply store.

### 2. The unit's motor is running, but no oxygen is emitted.

- Check that the OXYGEN ON/OFF button has been pressed.
- Check that all tube connections are secure.
- Check for damage or pinching of the hose, headset and nasal tube.

### 3. THERE IS LIMITED OXYGEN FLOW.

- Check that all tube connections are secure.
- Check for damage or pinching to the hose, headset and nasal tube.

### 4. THE AROMATHERAPY DOESN'T WORK.

- Check that the aromatherapy reservoir is screwed tightly, there are no cracks, and that it's not leaking.
- Check that there is enough essential oil inside the reservoir.
- Check that the essential oil of choice is of high enough concentration.



## **1 YEAR LIMITED WARRANTY**

Zadro products include a 1 Year limited warranty from date of purchase against defects in materials and workmanship. This warranty does not include damage to the product as a result of misuse or accident.

Should your product become defective during the warranty period, Zadro, Inc.<sup>™</sup> will repair or replace (at our sole discretion) your product, at no charge. However, you are responsible for properly packing your product and any applicable shipping charges to Zadro, Inc.<sup>™</sup>

Please contact our Customer Service at 800-468-4348, 714-892-9200 or email [customersupport@zadroinc.com](mailto:customersupport@zadroinc.com) on how to obtain an RMA (return authorization number). Please have available and/or include a copy of your receipt, model number (OXY03) and the issue you are experiencing with your product.

CUSTOMERS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA, PLEASE CONTACT THE RETAILER OF PURCHASE DIRECTLY TO RESOLVE ANY PRODUCT WARRANTY ISSUES.

Any product returned for preference is subject to a 20% restocking fee of the product and no shipping charges will be refunded.

Zadro, Inc.<sup>™</sup> shall not be liable for any incidental or consequential damages arising out of defects in this product, whether or not caused by its negligence.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

---

Thank you for your purchase! Please visit us online to leave comments, reviews, & see more exciting new products from [www.ZadroInc.com](http://www.ZadroInc.com)

© Zadro, Inc.<sup>™</sup>



Huntington Beach, CA  
Phone: (714) 892-9200  
[ZadroInc@ZadroInc.com](mailto:ZadroInc@ZadroInc.com)  
[ZadroInc.com](http://ZadroInc.com)

Rev. 08052020

Page 8

# GUÍA DE INICIO RÁPIDO

## ANTES DE UTILIZAR LA BARRA DE OXYGEN PARA LA PRIMERA VEZ, SIGA ESTOS 3 PASOS:

### PASO 1: CORTAR TODOS LOS LAZOS DE SEGURIDAD DE LA PARTE INFERIOR

- Con tijeras, corte los dos(2) lazos de seguridad blancos de la parte inferior de la unidad, asegurándose de retirar todos los lazos de la unidad. A continuación, deseche los lazos.

FIGURA 1



Encuentre los dos (2) lazos blancos en la parte inferior de la máquina

FIGURA 2



Corte ambos lazos blancos, retire todos los lazos de la máquina y deséchelos

FIGURA 3



Las salidas de aire deben estar libres de obstrucción

### PASO 2: COLOQUE LA UNIDAD SOBRE UNA SUPERFICIE DURA Y PLANA Y CONECTE LOS AURICULARES

- Coloque la unidad sobre una superficie estable, dura y plana, como una mesa, un suelo de baldosa o un escritorio.
- No coloque la unidad sobre una alfombra, alfombra, toalla u otra superficie blanda para evitar sobrecalentamiento y daños.
- Fije el tubo de flujo de aire a la parte delantera de la unidad empujando suavemente el extremo del tubo sobre la boquilla de salida de oxígeno (ver Figura 4)

### PASO 3: ENCIENDA TANTO LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y FLUJO DE OXÍGENO

- Conecte el adaptador de CA a la parte posterior de la unidad (consulte la figura 5) y, a continuación, conéctelo a una toma de corriente cercana.
- Encienda la fuente de alimentación con el interruptor de la parte posterior de la unidad.
- Para activar el flujo de oxígeno, pulse el botón "OXYGEN ON/OFF" en el panel de visualización de la pantalla LCD o en el mando a distancia.
- Tanto la fuente de alimentación de la unidad, **Y** la configuración de "ENCENDIDO / APAGADO DE OXÍGENO" debe estar activada para que comience el flujo de oxígeno

FIGURA 4

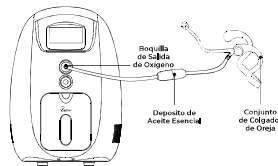


FIGURA 5



**ZADRO®**  
*Aromaterapia*  
**BARRA DE OXÍGENO PERSONAL**  
Número de Modelo : OXY03

## Información de Seguridad

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO DEBEN LEERSE, CUMPLIRSE Y SEGUIRSE ANTES DE QUE LA UNIDAD FUNCIONE.

ESTO NO ES UN DISPOSITIVO MÉDICO, Y NO DEBE UTILIZARSE COMO REEMPLAZO PARA LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS PRESCRITOS.

### SÓLO PARA USO DOMÉSTICO GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

#### QUÉ HAY EN LA CAJA

- Barra de oxígeno (1)
- Mando a distancia (1)
- Auriculares (1)
- Fijación del tubo nasal (1)
- Adaptador de CA (1)
- Aceite Esencial (1)

#### ESPECIFICACIONES

- Velocidad de salida de oxígeno ajustable (a nivel del mar):
  - 1L\* = 90% Concentración de Oxígeno
  - 2L\* = 75% Concentración de Oxígeno
  - 3L\* = 55% Concentración de Oxígeno
  - 4L\* = 45% Concentración de Oxígeno
  - 5L\* = 30% Concentración de Oxígeno
- Ruido: < 45dB
- Voltaje nominal: 120V
- Potencia máxima: 130W
- Dimensiones del producto:  
14.1" x 9.10" x 12.64"
- Peso: 14.33 lbs

#### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



**Precaución** : Consejos sobre cómo obtener el mejor rendimiento de la unidad.



**Advertencia** : Información de seguridad importante para los peligros que podrían causar lesiones graves o averías de la unidad.



**Peligro** : Información de seguridad urgente para peligros que pueden causar lesiones graves o la muerte.

## ! Precaución



- ESTA UNIDAD NO ES PARA USO MEDICO. Está diseñado para el mantenimiento de la salud.
- No bloquee el puerto de ventilación situado en la parte inferior de la unidad.
- No coloque la base sobre la alfombra u otra superficie blanda. Esto podría causar restricciones de flujo de aire y daños a la unidad.
- Para obtener el mejor rendimiento, limpie regularmente el filtro de admisión y el panel situados en la parte posterior de la unidad.

## ! Advertencia



- NO utilice la unidad cuando haya vapores peligrosos o aerosoles de pesticidas en la habitación.
- No deje la unidad cerca de zonas con calefacción. El calor alto hará que la caja de plástico se deforme.
- Durante el funcionamiento, no presione con fuerza sobre el tubo de plástico externo, ya que esto resultará en restricción del flujo de aire y daños a la unidad.
- No deje la unidad desatendida cuando esté encendida
- No utilice accesorios no recomendados por Zadro, ya que esto puede causar lesiones
- No altere el enchufe polarizado de ninguna manera

## ⊘ Precaución



Compruebe la clasificación eléctrica en la etiqueta de la unidad y la toma de corriente antes de conectar el cable de alimentación.



Cuando el cable de alimentación esté dañado o roto, devuélvalo a Zadro Products para su examen o reparación.



Las personas bebés, niños o discapacitados deben usar bajo la vigilancia de otro adulto para evitar lesiones accidentales.



Mantenga la unidad y todos los cables eléctricos alejados de superficies o electrodomésticos calentados. El oxígeno hará que el material sea inflamable.



Retire el enchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso.



No alcance la unidad en caso de que la unidad caiga al agua. Desenchufe la unidad inmediatamente y devuélvala a Zadro Products para su examen o reparación.



No usar mientras se baña o con las manos mojadas.



No fume ni tenga llamas abiertas cerca de la unidad.

## INTRODUCCIÓN

Restablezca su sensación de calma, relajación y bienestar general con la barra de oxígeno personal de aromaterapia de Zadro. Es tranquilo, compacto, portátil y modelado después de barras de oxígeno que se encuentran en resorts de lujo y spas que ayudan a aumentar el autocuidado y el bienestar general. La barra de oxígeno de Zadro produce aire enriquecido con oxígeno a través de un sistema de filtración de aire cuádruple y una membrana molecular importada por Francia que aumenta la concentración de oxígeno hasta un 90% (en comparación con el 21% de concentración de oxígeno del aire normal\*). La concentración ajustable de oxígeno desde el 30% de oxígeno hasta un 90% de oxígeno le permite controlar su experiencia de relajación. Elija añadir aceites esenciales al oxígeno para una aromaterapia instantánea similar al spa en casa (aceite esencial de lavanda incluido)\*\*. Cambie fácilmente la configuración durante la sesión con el cómodo mando a distancia. Disfrute de la tranquilidad con 8 ajustes de temporizador de 15 minutos hasta 2 horas con apagado automático. A continuación, mejore la purificación del oxígeno con la función de refuerzo de iones negativos opcional\*\*\*. Si está en un clima seco, use el depósito de agua opcional para infundir humedad al oxígeno purificado. Relájese con la barra de oxígeno mientras lee, en su escritorio, viendo la televisión, en la cama o disfrutando de sus pasatiempos. Simplemente use el auricular incluido o el accesorio del tubo de la nariz para una corriente suave de oxígeno.

## FUNCIONES


1. Experimente la lujosa aromaterapia tipo spa durante su sesión utilizando el aceite esencial de su elección o con el aceite esencial de lavanda incluido\*\*
2. 5 ajustes de concentración de oxígeno ajustables desde 30% de oxígeno hasta 90% oxígeno
3. El sistema de filtración de aire cuádruple y la membrana molecular importada por Francia producen oxígeno altamente purificado de hasta un 90% de concentración
4. Temporizador de apagado automático con 8 ajustes de temporizador de 15 minutos hasta 2 horas
5. Personalice su experiencia con el panel de visualización digital de la pantalla LCD o cambie fácilmente la configuración durante su sesión con el cómodo mando a distancia (batería CR2025 incluida)
6. Mejora la purificación de oxígeno con la función de refuerzo de iones negativos opcional\*\*\*
7. Si se encuentra en un clima seco, utilice el depósito de agua opcional que infunde el oxígeno purificado con humedad
8. Disfrute de menos ruido (<45 dB) desde la unidad para una experiencia tranquila
9. La protección contra sobrecalentamiento interno apagará automáticamente la unidad por seguridad
10. Se conecta a una toma de corriente estándar

\*\* Concentración promedio de oxígeno del 21% del aire ambiental al nivel del mar, pero puede variar según la ubicación


\*\* Consulte con un médico o proveedor de atención médica antes de usar cualquier aceite esencial durante el embarazo o la lactancia.

\*\*\* Consulte con un médico o proveedor de atención médica antes de incorporar iones negativos en su sesión de oxígeno

### DIAGRAMA DEL PANEL DE CONTROL

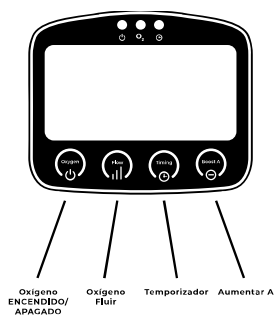


### DIAGRAMA EXTERIOR

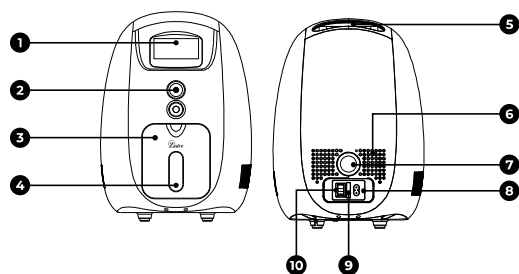

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Pantalla LCD                  | 6. Respiraderos de calor                  |
| 2. Boquilla de salida de oxígeno | 7. Filtro de aire                         |
| 3. Panel de tanque de agua       | 8. Conector de alimentación               |
| 4. Reserva de agua               | 9. Fusible                                |
| 5. Asa superior                  | 10. Interruptor de fuente de alimentación |

## 2 MANERAS DE USAR

- Elija el auricular o el tubo nasal y conéctelo al extremo del tubo de flujo de aire.
- Coloque el auricular o el accesorio del tubo nasal en su cabeza y ajústelo a una posición cómoda.
- Si usa los auriculares: colóquelos sobre las orejas y ajuste el brazo flexible para estar directamente frente a su nariz.
- Si usa el accesorio de sonda nasal: coloque la sonda nasal con las puntas nasales hacia arriba y curvadas hacia la cara. Luego inserte las dos puntas nasales en las fosas nasales y colóquelas hasta que esté cómodo.

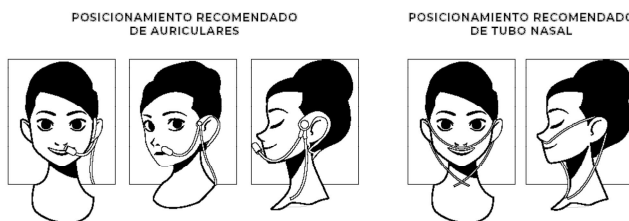

## CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO AJUSTABLE

1. Elija entre 5 concentraciones de oxígeno ajustables (basadas en el nivel del mar):
  - a. 1L\* = 90% de Oxígeno (concentración más alta)
  - b. 2L\* = 75% de Oxígeno
  - c. 3L\* = 55% de Oxígeno
  - d. 4L\* = 45% de Oxígeno
  - e. 5L\* = 30% de Oxígeno (concentración más baja)
2. Si es la primera vez que usa una barra de oxígeno, le recomendamos comenzar con la concentración más baja (configuración de 5L) y luego aumentar la concentración con el tiempo.


\*L = Liter of air per minute

## CONFIGURACIONES DE TEMPORIZADOR

1. Cuando el OXÍGENO ENCENDIDO / APAGADO está encendido, presione los botones TIMER arriba y abajo en el panel de visualización de la pantalla LCD en la parte frontal de la unidad, o en el control remoto.
2. Elija entre las siguientes 8 configuraciones de temporizador (la unidad se apagará automáticamente cuando finalice la configuración del temporizador):
  - 15 minutos
  - 30 minutos
  - 45 minutos
  - 1 hora
  - 1 hora 15 minutos
  - 1 hora 30 minutos
  - 1 hora 45 minutos
  - 2 horas

## AROMATERAPIA

- Use el depósito de aromaterapia para infundir el oxígeno con su elección de aceites esenciales (opcional).
- Desenrosque el depósito ubicado en el medio del tubo de aire girándolo hasta que se separe por completo, agregue la cantidad deseada de aceite esencial (se recomiendan 2-4 gotas), luego atornille el depósito nuevamente para fijarlo en su lugar.

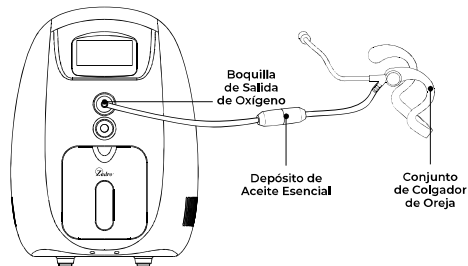


## BOOST A CONFIGURACIÓN


1. Mejore la purificación del oxígeno con la configuración Boost A (opcional) que emite iones negativos para filtrar aún más el aire.
2. Después de encender el flujo de aire de oxígeno, presione el botón "BOOST A" en el panel de visualización de la pantalla LCD en la parte frontal de la unidad o en el control remoto.

## HUMEDAD

1. Si se encuentra en un clima seco, puede aumentar la humedad dentro del flujo de oxígeno utilizando la función de humedad (opcional).
2. Antes de encender la unidad, saque la puerta del humidificador y deslice la taza del tanque de agua. Luego llene la taza con agua hasta la línea de llenado "MÁX".
3. Encienda el interruptor de la fuente de alimentación en la parte posterior de la unidad, luego presione el botón "OXYGEN ON / OFF" en el panel de visualización de la pantalla LCD en la parte frontal de la unidad, o en el control remoto.
4. El tanque de agua se iniciará automáticamente cuando
5. Se presiona el botón OXYGEN ON / OFF para encender el flujo de aire.
6. Para rellenar el tanque de agua, apague primero el flujo de oxígeno y la fuente de alimentación antes de deslizar la taza de agua.

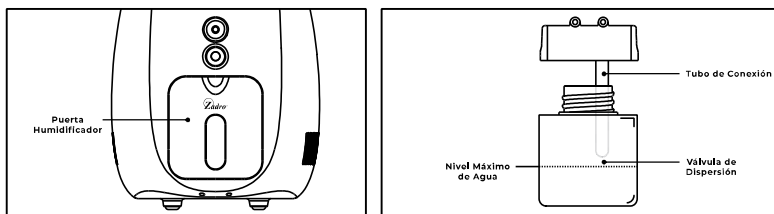

## MANTENIMIENTO

 <b>PELIGRO</b>	<b>APAGUE LA UNIDAD Y RETIRE LA CORRIENTE CABLE DE LA TOMA DE CORRIENTE ANTES DEL MANTENIMIENTO PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS.</b>
--	---

### LIMPIEZA DEL AURICULAR Y TUBOS

1. Se puede formar condensación de agua en el tubo de flujo de aire y en el depósito de aceite esencial si se usa la barra de oxígeno en lugares con alta humedad. Limpie ambas piezas antes de guardar la unidad por largos períodos de tiempo.
2. Enjuague el tubo de flujo de aire y el depósito de aceite esencial con agua tibia y deje secar al aire antes de almacenar o volver a colocar las piezas en la unidad.

### LIMPIEZA DE LA UNIDAD

1. Desenchufe la unidad del tomacorriente. Limpie la unidad con un paño suave y limpio que esté ligeramente húmedo con agua. Luego seque con un paño seco. No use toallas de papel (las fibras pueden quedar atrapadas en los respiraderos de la unidad).
2. No use detergentes, benceno, disolventes o alcohol.

### LIMPIEZA DEL RESERVORO DE AGUA

1. Abra el panel del tanque de agua y extraiga la taza de agua de la unidad.
2. Enjuague la taza con agua tibia y seque con un paño antes de volver a colocarla en la unidad. No use detergentes, benceno, disolventes o alcohol.

### LIMPIEZA DEL RESERVOR DE ACEITE ESENCIAL

1. Gire para desbloquear el depósito de aceite esencial.
2. Enjuague cada pieza del depósito con agua tibia. No use detergentes, benceno, disolventes o alcohol.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### 1. La unidad no se enciende.

- Compruebe que el adaptador de CA esté enchufado en la parte posterior del unidad, y que también está conectado de forma segura a un toma de corriente.

- Compruebe que el cable del adaptador de CA no esté dañado.
- Verifique que su toma de corriente esté viva y sin daños.
- Verifique si el fusible en la parte posterior de la unidad es negro o si el cable está roto. Si es así, reemplace el fusible con un fusible estándar de 5 amperios de una tienda local de suministros de hardware.

**2. El motor de la unidad está funcionando, pero no se emite oxígeno.**

- Compruebe que se ha presionado el botón OXYGEN ON / OFF.
- Verifique que todas las conexiones de los tubos estén seguras.
- Compruebe si hay daños o pellizcos en la manguera, auriculares y tubo nasal.

**3. HAY UN FLUJO DE OXÍGENO LIMITADO.**

- Compruebe que todas las conexiones de los tubos son seguras.
- Compruebe si hay daños o pellizcos en la manguera, auriculares y tubo nasal.

**4. LA AROMATERAPIA NO FUNCIONA.**

- Compruebe que el depósito de aromaterapia esté bien atornillado, no hay grietas y eso no tiene fugas.
- Verifique que haya suficiente aceite esencial dentro del depósito.
- Verifique que el aceite esencial elegido sea lo suficientemente alto concentración.

**GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO**

Los productos Zadro incluyen una garantía limitada de 1 año a partir de la fecha de compra contra defectos en materiales y mano de obra. Esta garantía no incluye daños al producto como resultado de un mal uso o accidente.

Si su producto se vuelve defectuoso durante el período de garantía, Zadro, Inc.™ reparará o reemplazará (a nuestro exclusivo criterio) su producto, sin costo alguno. Sin embargo, usted es responsable de empacar correctamente su producto y cualquier cargo de envío aplicable a Zadro, Inc.™

Comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Cliente al 800-468-4348, 714-892-9200 o envíe un correo electrónico a [customersupport@zadroinc.com](mailto:customersupport@zadroinc.com) para obtener información sobre cómo obtener un RMA (número de autorización de devolución). Tenga disponible y/o incluya una copia de su recibo, número de modelo (OXY03) y el problema que está experimentando con su producto.

LOS CLIENTES FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, COMUNÍQUESE DIRECTAMENTE CON EL DISTRIBUIDOR DE COMPRA PARA RESOLVER CUALQUIER PROBLEMA RELACIONADO CON LA GARANTÍA DEL PRODUCTO.

Cualquier producto devuelto por preferencia está sujeto a una tarifa de reposición de existencias del producto del 20% y no se reembolsarán los gastos de envío.

Zadro, Inc.™ no será responsable por daños incidentales o consecuentes que surjan de defectos en este producto, ya sea causado o no por su negligencia.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes ni permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de un estado a otro.

Gracias por su compra! Por favor visítenos en línea para dejar comentarios, opiniones, y ver más nuevos productos emocionantes de [www.ZadroInc.com](http://www.ZadroInc.com)

© Zadro, Inc.™



Huntington Beach, CA  
 Phone: (714) 892-9200  
[ZadroInc@ZadroInc.com](mailto:ZadroInc@ZadroInc.com)  
[ZadroInc.com](http://ZadroInc.com)



# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## AVANT D'UTILISER LA BARRE OXYGÈNE POUR LA PREMIÈRE FOIS, SUIVEZ CES 3 ÉTAPES:

### ÉTAPE 1 : COUPEZ TOUS LES LIENS DE SÉCURITÉ PAR LE BAS

- À l'aide de ciseaux, coupez les deux(2) attaches de sécurité blanches du bas de l'unité, en veillant à retirer toutes les attaches de l'unité. Puis jetez les cravates.

FIGURE 1



Trouvez les deux (2) attaches blanches au bas de la machine

FIGURE 2



Coupez les deux liens blancs, retirez tous les liens de la machine et jetez

FIGURE 3



Les bouches d'aération ne doivent pas être obstruées

### ÉTAPE 2 : PLACEZ L'APPAREIL SUR UNE SURFACE DURE ET PLATE ET FIXEZ LE CASQUE

- Placez l'unité sur une surface stable, dure et plane telle qu'une table, un sol carrelé ou un bureau.
- Ne placez pas l'appareil sur un tapis, un tapis, une serviette ou toute autre surface douce pour éviter la surchauffe et les dommages.
- Fixez le tube de circulation d'air à l'avant de l'unité en poussant doucement l'extrémité du tube sur la buse de sortie d'oxygène (voir la figure 4)

### ÉTAPE 3 : ALLUMER À LA FOIS L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE **ET** LE FLUX D'OXYGÈNE

- Branchez l'adaptateur secteur à l'arrière de l'unité (voir la figure 5), puis branchez-le dans une prise électrique à proximité.
- Allumez l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil.
- Pour activer le débit d'oxygène, appuyez sur le bouton « OXYGÈNE ON/OFF » sur le panneau d'affichage de l'écran LCD ou sur la télécommande. L'alimentation électrique de l'unité **ET** le réglage « OXYGEN ON/OFF » doivent être activés pour que le débit d'oxygène démarre.

FIGURE 4

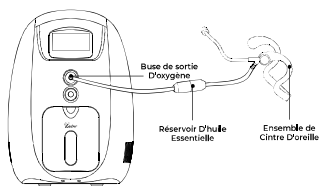


FIGURE 5



**ZADRO®**  
*Aromathérapie*  
**BARRE D'OXYGÈNE PERSONNELLE**  
Numéro de Modèle : OXY03

## Consignes de Sécurité Importantes

### LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION  
DOIVENT ÊTRE LUES, RESPECTÉES ET SUIVIES AVANT  
D'UTILISER L'UNITÉ.

THIS IS NOT A MEDICAL DEVICE , AND SHOULD NOT BE USED  
AS A REPLACEMENT FOR PRESCRIBED MEDICAL TREATMENTS.

### POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS




#### QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE

- Barre à oxygène (1)
- Télécommande (1)
- Casque (1)
- Fixation de tube nasal (1)
- Adaptateur secteur (1)
- Huile essentielle (1)

#### CARACTÉRISTIQUES

- Taux de sortie d'oxygène réglable (au niveau de la mer) :
  - 1L\* = 90% Concentration en Oxygène
  - 2L\* = 75% Concentration en Oxygène
  - 3L\* = 55% Concentration en Oxygène
  - 4L\* = 45% Concentration en Oxygène
  - 5L\* = 30% Concentration en Oxygène
- Bruit: < 45dB
- Tension nominale: 120V
- Puissance maximale: 130W
- Dimensions du produit:  
14.1 " x 9.10 " x 12.64 "
- Poids: 14,33 lb

#### INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

-  **Attention** : Conseils sur la façon d'obtenir les meilleures performances de l'unité.
-  **Avertissement** : Informations importantes de sécurité concernant les dangers pouvant entraîner des blessures graves ou une panne d'unité.
-  **Danger** : Information de sécurité urgente sur les dangers pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

## Mise en Garde



- CET APPAREIL N'EST PAS POUR UN USAGE MÉDICAL. Il est conçu pour le maintien de la santé.
- Ne bloquez pas l'orifice de ventilation situé au bas de l'unité.
- Ne posez pas la base sur un tapis ou une autre surface molle. Cela pourrait entraîner une restriction du débit d'air et endommager l'unité.
- Pour de meilleures performances, nettoyez régulièrement le filtre d'admission et le panneau situé à l'arrière de l'unité.

## Avertissement



- N'UTILISEZ PAS l'appareil lorsqu'il y a des vapeurs dangereuses ou des pulvérisations de pesticides dans la pièce.
- Ne laissez pas l'appareil à proximité de zones chauffées. Une chaleur élevée entraînera la déformation du boîtier en plastique.
- Pendant le fonctionnement, n'appuyez pas trop fort sur le tube en plastique externe car cela entraînerait une restriction du débit d'air et des dommages à l'unité.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par Zadro car cela pourrait provoquer des blessures
- Ne modifiez en aucun cas la fiche polarisée

## Mise en Garde



Vérifiez les caractéristiques électriques sur l'étiquette de l'appareil et sur la prise murale avant de brancher le cordon d'alimentation.



Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou cassé, renvoyez-le à Zadro Products pour examen ou réparation.



Les nourrissons, les enfants ou les personnes handicapées doivent utiliser sous la surveillance d'un autre adulte pour éviter les blessures accidentelles.



Gardez l'appareil et tous les cordons électriques éloignés des surfaces ou des appareils chauffés. L'oxygène rendra le matériau inflammable.



Veuillez retirer la fiche de la prise électrique lorsqu'elle n'est pas utilisée.



N'attrapez pas l'appareil au cas où l'appareil tomberait dans l'eau. Débranchez l'appareil immédiatement, puis renvoyez-le à Zadro Products pour examen ou réparation.



Ne pas utiliser pendant le bain ou avec les mains mouillées.



Ne pas fumer ni avoir de flammes nues à proximité de l'appareil.

## INTRODUCTION

Rétablissez votre sentiment de calme, de relaxation et de bien-être général avec le bar à oxygène personnel Aromatherapy de Zadro. Il est silencieux, compact, portable et inspiré des bars à oxygène des complexes de luxe et des spas qui contribuent à améliorer les soins personnels et le bien-être général. Le bar à oxygène de Zadro produit de l'air enrichi en oxygène grâce à un quadruple système de filtration de l'air et une membrane moléculaire importée en France qui augmente la concentration d'oxygène jusqu'à 90% (contre 21% de concentration d'oxygène dans l'air normal \*). La concentration d'oxygène réglable de 30% d'oxygène à 90% d'oxygène vous permet de contrôler votre expérience de relaxation. Choisissez d'ajouter des huiles essentielles à l'oxygène pour une aromathérapie instantanée de type spa à la maison (huile essentielle de lavande incluse) \*\*. Modifiez facilement les paramètres pendant votre session avec la télécommande pratique. Ayez l'esprit tranquille avec 8 réglages de minuterie de 15 minutes à 2 heures avec arrêt automatique. Améliorez ensuite la purification de l'oxygène avec la fonction optionnelle d'amplification des ions négatifs \*\*\*. Si vous êtes dans un climat sec, utilisez le réservoir d'eau en option pour infuser l'oxygène purifié avec de l'humidité. Détendez-vous avec le bar à oxygène en lisant, à votre bureau, en regardant la télévision, au lit ou en profitant de vos loisirs. Portez simplement le casque ou le tube nasal inclus pour un léger jet d'oxygène.

## FONCTIONNALITÉS

1. Faites l'expérience d'une aromathérapie luxueuse de type spa pendant votre séance en utilisant l'huile essentielle de votre choix ou avec l'huile essentielle de lavande incluse \*\*
2. 5 réglages de concentration d'oxygène réglables de 30% d'oxygène à 90% d'oxygène
3. Le système quadruple de filtration de l'air et la membrane moléculaire importée en France produisent de l'oxygène hautement purifié jusqu'à 90% de concentration
4. Minuterie d'arrêt automatique avec 8 réglages de minuterie de 15 minutes à 2 heures
5. Personnalisez votre expérience en utilisant le panneau d'affichage de l'écran LCD numérique ou modifiez facilement les paramètres pendant votre session avec la télécommande pratique (pile CR2025 incluse)
6. Améliorez la purification de l'oxygène avec la fonction optionnelle d'amplification des ions négatifs \*\*\*
7. Si vous êtes dans un climat sec, utilisez le réservoir d'eau en option qui infuse l'oxygène purifié avec de l'humidité
8. Profitez de moins de bruit (<45 dB) de l'appareil pour une expérience paisible
9. La protection interne contre la surchauffe éteindra automatiquement l'unité pour plus de sécurité
10. Se branche sur une prise électrique standard

\*\* Concentration moyenne d'oxygène de 21% dans l'air ambiant au niveau de la mer, mais peut varier en fonction de l'emplacement

\*\* Consultez un médecin ou un fournisseur de soins de santé avant d'utiliser des huiles essentielles pendant la grossesse ou l'allaitement

\*\*\* Consultez d'abord un médecin ou un fournisseur de soins de santé avant d'incorporer des ions négatifs dans votre séance d'oxygène

DIAGRAMME DU PANNEAU DE COMMANDE



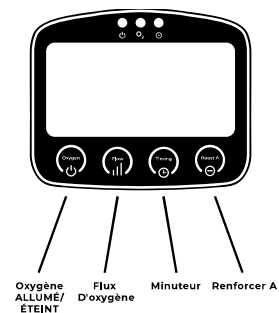


DIAGRAMME EXTÉRIEUR

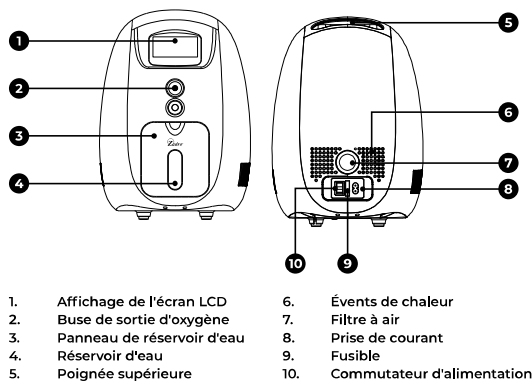

## 2 FAÇONS DE PORTER

- Choisissez le casque ou le tube nasal et fixez-le à l'extrémité du tube de circulation d'air.
- Placez le casque ou le tube nasal sur votre tête et ajustez-le dans une position confortable..
- Si vous utilisez le casque: placez-le sur vos oreilles et ajustez le bras flexible pour qu'il soit directement devant votre nez.
- Si vous utilisez l'accessoire pour sonde nasale: positionnez la sonde nasale avec les broches nasales orientées vers le haut et courbées vers le visage. Insérez ensuite les deux broches nasales dans vos narines et positionnez-les jusqu'à ce qu'elles soient confortables.

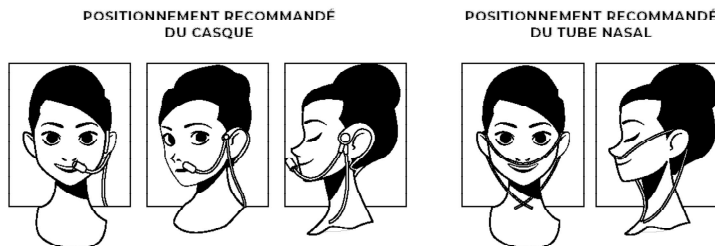

## CONCENTRATION D'OXYGÈNE RÉGLABLE

1. Choisissez parmi 5 concentrations d'oxygène réglables (basé au niveau de la mer):
  - a. 1L\* = 90% D'oxygène (concentration la plus élevée)
  - b. 2L\* = 75% D'oxygène
  - c. 3L\* = 55% D'oxygène
  - d. 4L\* = 45% D'oxygène
  - e. 5L\* = 30% D'oxygène (concentration la plus faible)
2. Si c'est la première fois que vous utilisez une barre d'oxygène, nous vous recommandons de commencer à la concentration la plus basse (réglage 5 L), puis d'augmenter la concentration au fil du temps.


\*L = Litre d'air par minute

## TIMER SETTINGS

1. Lorsque l'OXYGEN ON/OFF est allumé, appuyez sur les boutons TIMER haut et bas sur le panneau d'affichage de l'écran LCD à l'avant de l'appareil ou sur la télécommande.
2. Choisissez entre les 8 réglages de minuterie suivants (l'appareil s'éteint automatiquement lorsque le réglage de la minuterie est terminé):
  - 15 minutes
  - 30 minutes
  - 45 minutes
  - 1 heure
  - 1 heure 15 minutes
  - 1 heure 30 minutes
  - 1 heure 45 minutes
  - 2 heure

## AROMATHÉRAPIE

- Utilisez le réservoir d'aromathérapie pour infuser l'oxygène avec votre choix d'huiles essentielles (facultatif).
- Dévissez le réservoir situé au milieu du tube à air en le tournant jusqu'à ce qu'il se détache complètement, ajoutez la quantité désirée d'huile essentielle (2 à 4 gouttes sont recommandées), puis revissez le réservoir pour le verrouiller en place.

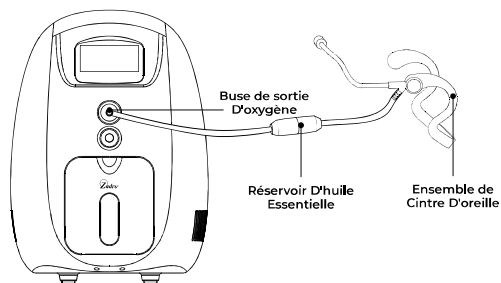


## BOOST A RÉGLAGE

1. Améliorez la purification de l'oxygène avec le réglage Boost A (en option) qui émet des ions négatifs pour filtrer davantage l'air.
2. Une fois le débit d'air d'oxygène activé, appuyez sur le bouton «BOOST A» sur le panneau d'affichage de l'écran LCD à l'avant de l'unité ou sur la télécommande.

## HUMIDITÉ

1. Si vous êtes dans un climat sec, vous pouvez augmenter l'humidité dans le flux d'oxygène en utilisant la fonction d'humidité (en option).
2. Avant d'allumer l'unité, tirez la porte de l'humidificateur et faites glisser le réservoir d'eau. Remplissez ensuite la tasse avec de l'eau jusqu'à la ligne de remplissage «MAX».
3. Allumez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière de l'appareil, puis appuyez sur le bouton «OXYGEN ON/OFF» sur le panneau d'affichage de l'écran LCD à l'avant de l'appareil ou sur la télécommande.
4. Le réservoir d'eau démarre automatiquement lorsque le bouton OXYGEN ON / OFF est enfoncé pour activer le débit d'air.
5. Pour remplir le réservoir d'eau, coupez d'abord le débit d'oxygène et l'alimentation électrique avant de faire glisser le gobelet d'eau.

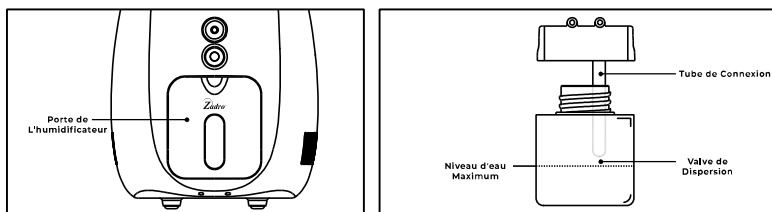

## ENTRETIEN



**DANGER**

ÉTEIGNEZ L'APPAREIL ET COUPEZ L'ALIMENTATION CORDON DE LA PRISE ÉLECTRIQUE AVANT L'ENTRETIEN POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES.

### NETTOYAGE DU CASQUE ET DES TUBES

1. De la condensation d'eau peut se former dans le tube d'écoulement d'air et le réservoir d'huile essentielle si vous utilisez la barre d'oxygène dans des endroits très humides. Nettoyez les deux pièces avant de ranger l'appareil pendant de longues périodes.
2. Rincez le tube de circulation d'air et le réservoir d'huile essentielle à l'eau tiède et laissez sécher à l'air avant de les ranger ou de remettre les pièces sur l'unité.

### NETTOYAGE DE L'UNITÉ

1. Débranchez l'appareil de la prise électrique. Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et propre légèrement humide avec de l'eau, puis essuyez-le avec un chiffon sec. N'utilisez pas de serviettes en papier (les fibres peuvent se coincer dans les événements de l'appareil).
2. N'utilisez pas de détergents, de benzène, de diluant ou d'alcool.

### NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

1. Ouvrez le panneau du réservoir d'eau et faites glisser le réservoir d'eau hors de l'unité.
2. Rincez la tasse à l'eau tiède et séchez-la avec un chiffon avant de la remettre en place sur l'appareil. N'utilisez pas de détergents, de benzène, de diluant ou d'alcool.

### NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D'HUILE ESSENTIELLE

1. Tournez pour déverrouiller le réservoir d'huile essentielle.
2. Rincez chaque pièce du réservoir à l'eau tiède. N'utilisez pas de détergents, de benzène, de diluant ou d'alcool.

## DÉPANNAGE

### 1. L'appareil ne s'allume pas.

- Vérifiez que l'adaptateur secteur est branché à l'arrière de l'appareil et qu'il est galemment correctement branché dans une prise électrique à proximité.

- Vérifiez que le cordon de l'adaptateur secteur n'est pas endommagé.
- Vérifiez que votre prise murale est sous tension et en bon état.
- Vérifiez si le fusible à l'arrière de l'appareil est noir ou si le fil est cassé. Si tel est le cas, remplacez le fusible par un fusible standard de 5 ampères provenant d'un magasin de matériel informatique local.

**2. Le moteur de l'unité fonctionne, mais aucun oxygène n'est émis.**

- Vérifiez que le bouton OXYGEN ON / OFF a été enfoncé.
- Vérifiez que toutes les connexions de tube sont sécurisées.
- Vérifiez que le tuyau, le casque et le sonde nasale.

**3. LE DÉBIT D'OXYGÈNE EST LIMITÉ.**

- Vérifiez que toutes les connexions de tube sont sécurisées.
- Vérifiez que le tuyau, le casque et le sonde nasale.

**4. TL'AROMATHÉRAPIE NE FONCTIONNE PAS.**

- Vérifiez que le réservoir d'aromathérapie est bien vissé, il n'y a pas de fissures, et qu'il ne fuit pas.
- Vérifiez qu'il y a suffisamment d'huile essentielle à l'intérieur du réservoir.
- Vérifiez que l'huile essentielle de choix est suffisamment élevée concentration.

**GARANTIE LIMITÉE D'UN AN**

Les produits Zadro incluent une garantie limitée d'un an à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne comprend pas les dommages le produit à la suite d'une mauvaise utilisation ou d'un accident.

Si votre produit devenait défectueux pendant la période de garantie, Zadro, Inc.™ réparera ou remplacera (à notre seule discrétion) votre produit, sans frais. Cependant, vous êtes responsable d'emballer correctement votre produit et tous les frais d'expédition applicables à Zadro, Inc.™

Veuillez contacter notre service client au 800-468-4348, 714-892-9200 ou envoyer un e-mail à [customersupport@zadrolnc.com](mailto:customersupport@zadrolnc.com) pour savoir comment obtenir un RMA (numéro d'autorisation de retour). Veuillez disposer et / ou inclure une copie de votre reçu, le numéro de modèle (OXY03) et le problème que vous rencontrez avec votre produit.

LES CLIENTS HORS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, VEUILLEZ CONTACTER LE DÉTAILLANT D'ACHAT DIRECTEMENT POUR RÉSOUDRE TOUT PROBLÈME DE GARANTIE DU PRODUIT.

Tout produit retourné de préférence est soumis à des frais de restockage de 20% du produit et aucun frais d'expédition ne sera remboursé.

Zadro, Inc.™ n'est pas responsable des dommages accessoires ou indirects résultant de défauts de ce produit, qu'ils soient ou non causés par sa négligence.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ou n'autorisent pas les limitations de la durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

Merci pour votre achat! S'il vous plaît visitez-nous en ligne pour laisser des commentaires, des critiques et voir de nouveaux produits plus excitants de [www.Zadrolnc.com](http://www.Zadrolnc.com)

© Zadro, Inc.™

**Zadro**<sup>®</sup>  
Huntington Beach, CA  
Phone: (714) 892-9200  
[Zadrolnc@Zadrolnc.com](mailto:Zadrolnc@Zadrolnc.com)  
[Zadrolnc.com](http://Zadrolnc.com)

