

El sillón clínico reclinable de lujo Deluxe establece un nuevo estándar de confort para el paciente y de facilidad de uso para quien realiza la atención del paciente y su cuidado.

- Los sillones reclinables de cuidado clínico serie FR566G Deluxe cuentan con tres posiciones para la comodidad del paciente. La cuarta posición es el Trendelenburg (o posición de choque) la cual debe ser activada por personal médico solamente. La posición Trendelenburg no puede ser activada por el paciente mismo cuando éste se encuentre sentado en el sillón.
- La primera posición es la **posición vertical**. Esta posición es ideal para el transporte de pacientes y puede ser utilizada para iniciar el tratamiento/terapia del paciente.
- La segunda posición es la **primera posición de inclinación** que también se conoce como la posición de "TV". Esta posición también es ideal para el tratamiento del paciente, el descanso y la lectura.
- La tercera posición es la **segunda posición de inclinación** que es también se conoce como la posición "Total inclinación". Esta posición es también recomendada para el tratamiento del paciente, descanso y lectura.
- El ancho de su asiento anatómico y su respaldo, junto con el descansapiés integrado, proporcionan en conjunto, un mayor nivel de confort. Construido con acojinamiento integrado en el respaldo, proporciona mayor soporte en los brazos cuando el mecanismo Trendelenburg está activado.
- Descansabrazos diseñados a manera de muro-protector, lo que aumenta la durabilidad de los mismos y protege las paredes de estropearse.
- Mayor altura del piso al respaldo, lo que le permite al personal médico elevar al paciente con menos esfuerzo, reduciendo la posibilidad de una lesión en la espalda.
- La **posición Trendelenburg extra profunda** puede ser accionada fácilmente desde cualquier lado de reclinable mediante un conveniente pedal. Un ángulo más pronunciado ayuda a mejorar la estabilización del paciente.
- Cuatro ruedas giratorias Tente[®] facilitan el transporte y maniobrabilidad en lugares cerrados o áreas confinadas. Tres ruedas con freno total y fácilmente localizables mediante la pestaña negra sobre la rueda de bloqueo y giro, en un solo movimiento. El bloqueo de las ruedas direccionales de gran visibilidad debido a la lengüeta verde sobre las ruedas, permite al reclinable realizar movimientos en recto con menos esfuerzo durante el transporte.
- Mesas laterales de alto impacto y durabilidad se sientan al ras del brazo reclinable para convenientemente sostener los materiales de preparación. Son fáciles de accionar por el personal médico. La superficie de la mesa lateral es suave, con bordes lisos y de corte estrecho sin uniones, para facilitar la limpieza.
- Mecanismo reclinable de alta resistencia y duración.
- Máxima capacidad de peso (DISTRIBUIDO DE MANERA UNIFORME) de 350 libras (158.75 kg).



Paneles interiores tapizados

Mesas laterales suaves, con bordes lisos y de corte estrecho sin uniones

Especificaciones

- Altura completa 50" (127 cm)
- Ancho completo 31"(78.74 cm)
- Profundidad completa 43" (109.22 cm)
- Ancho entre brazos 21" (53.340 cm)
- Altura de brazo al piso 27.5" (69.850 cm)
- Altura de brazo al asiento 8" (20.320 cm)
- Altura del asiento 22" (55.880 cm)
- Ancho del asiento 20.5" (52.070 cm)
- Profundidad del asiento 20" (50.80 cm)
- Profundidad cuando totalmente reclinado en Trendelenburg 75" (190.50 cm)
- Ancho con ambas mesas en posición vertical 51" (129.54 cm)
- Peso unitario: 145 lbs (65.77 kg).
- Máxima capacidad de peso (distribuido de manera uniforme) 350 libras (158.75 kg).




Paneles laterales removibles para facilitar el acceso de mantenimiento y limpieza.



Posición Trendelenburg fácil de ejecutar. Puede ser activada desde cualquier lado del reclinable mediante un conveniente pedal integrado.



Múltiples posiciones para mayor confort del paciente

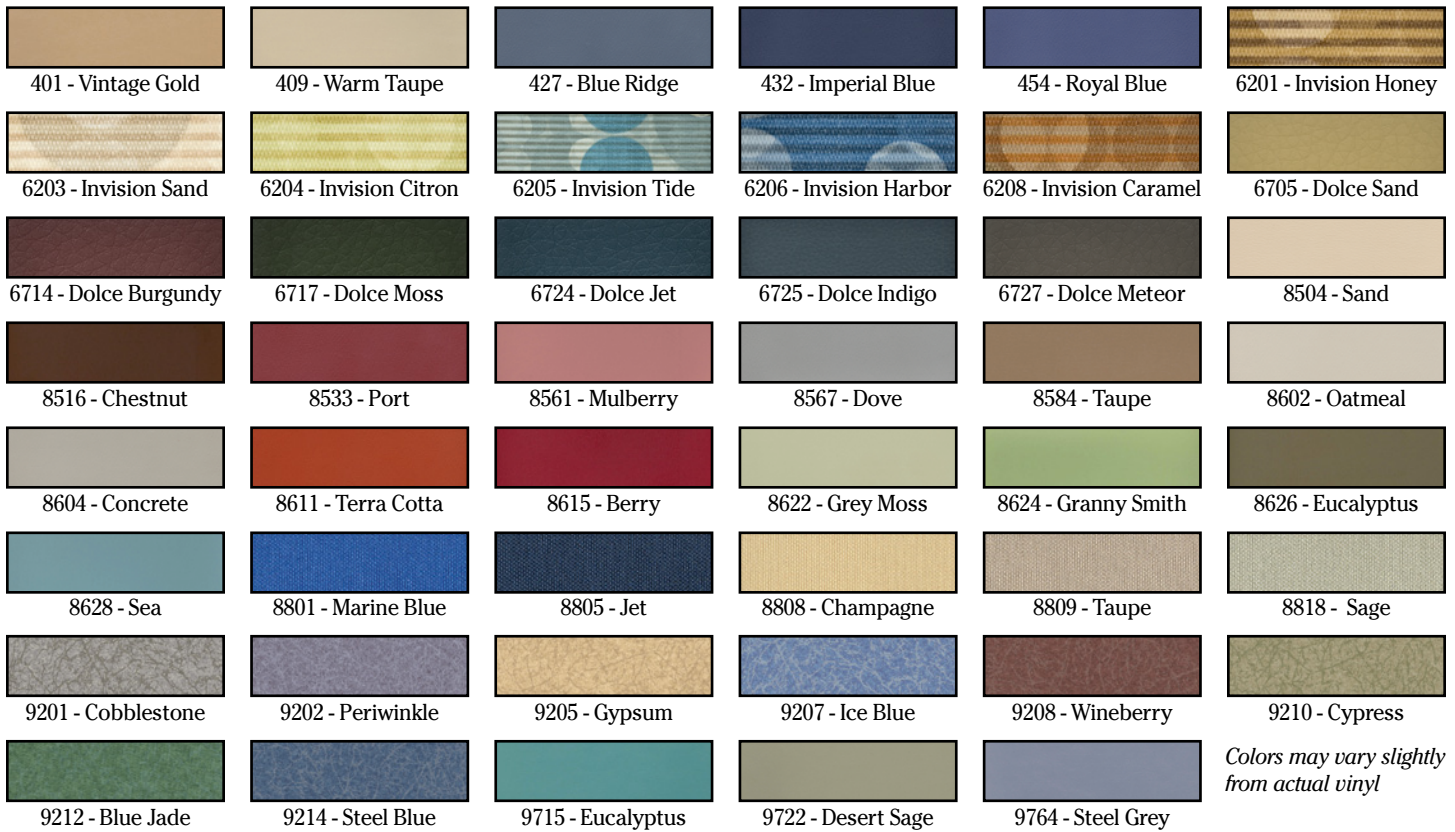

Available with Heat and Massage Option

<i>Standard</i>	<i>with Heat & Massage</i>		<i>Standard</i>	<i>with Heat & Massage</i>	
FR566G401	FR566GH401	Vintage Gold	FR566G8604	FR566GH8604	Concrete
FR566G409	FR566GH409	Warm Taupe	FR566G8611	FR566GH8611	Terra Cotta
FR566G427	FR566GH427	Blue Ridge	FR566G8615	FR566GH8615	Berry
FR566G432	FR566GH432	Imperial Blue	FR566G8622	FR566GH8622	Grey Moss
FR566G454	FR566GH454	Royal Blue	FR566G8624	FR566GH8624	Granny Smith
FR566G6201	FR566GH6201	Invision Honey	FR566G8626	FR566GH8626	Eucalyptus
FR566G6203	FR566GH6203	Invision Sand	FR566G8628	FR566GH8628	Sea
FR566G6204	FR566GH6204	Invision Citron	FR566G8801	FR566GH8801	Marine Blue
FR566G6205	FR566GH6205	Invision Tide	FR566G8805	FR566GH8805	Jet
FR566G6206	FR566GH6206	Invision Harbor	FR566G8808	FR566GH8808	Champagne
FR566G6208	FR566GH6208	Invision Caramel	FR566G8809	FR566GH8809	Taupe
FR566G6705	FR566GH6705	Dolce Sand	FR566G8818	FR566GH8818	Sage
FR566G6714	FR566GH6714	Dolce Burgundy	FR566G9201	FR566GH9201	Cobblestone
FR566G6717	FR566GH6717	Dolce Moss	FR566G9202	FR566GH9202	Periwinkle
FR566G6724	FR566GH6724	Dolce Jet	FR566G9205	FR566GH9205	Gypsum
FR566G6725	FR566GH6725	Dolce Indigo	FR566G9207	FR566GH9207	Ice Blue
FR566G6727	FR566GH6727	Dolce Meteor	FR566G9208	FR566GH9208	Wineberry
FR566G8504	FR566GH8504	Sand	FR566G9210	FR566GH9210	Cypress
FR566G8516	FR566GH8516	Chestnut	FR566G9212	FR566GH9212	Blue Jade
FR566G8533	FR566GH8533	Port	FR566G9214	FR566GH9214	Steel Blue
FR566G8561	FR566GH8561	Mulberry	FR566G9715	FR566GH9715	Eucalyptus
FR566G8567	FR566GH8567	Dove	FR566G9722	FR566GH9722	Desert Sage
FR566G8584	FR566GH8584	Taupe	FR566G9764	FR566GH9764	Steel Grey
FR566G8602	FR566GH8602	Oatmeal			

